

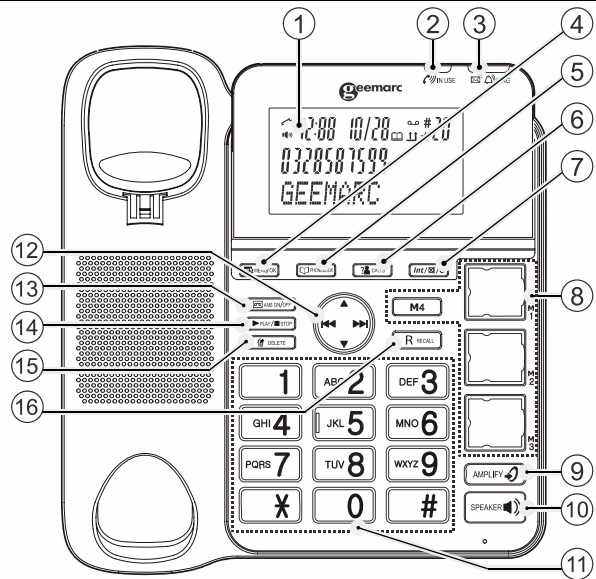
# AMPLIDECT™ COMBI 295

## KURZANLEITUNG

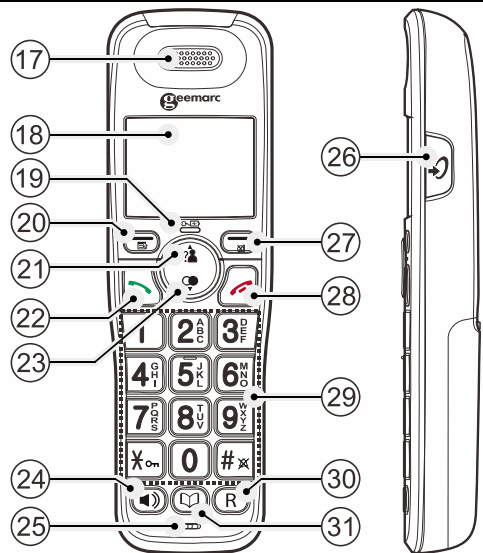
De

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com), um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten!

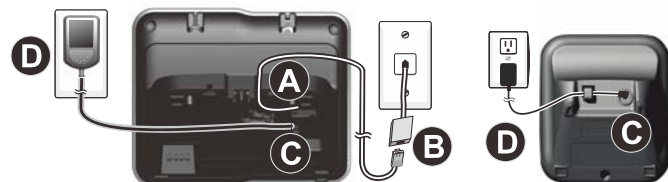
### Basisstation



### Handapparat



### Anschluss Basisstation



**ACHTUNG:** Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer

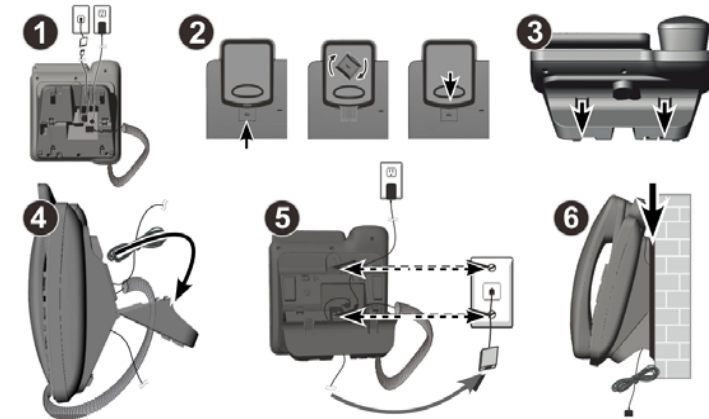
Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C). Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telekommunikation Limited Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)

Wiederaufladbarer Akku: Modell: NI-MH AAA500x2. 2,4V, 500mAh. Corun.

### Wandmontage



### INHALT DER VERPACKUNG

1 Telefon-Basisstation, 1 verkabelter Handapparat, 1 kabelloser Handapparat, 2 Netzteile, 1 Ladegerät, 1 Telefonkabel, 1 NiMH Akkupack, 1 Kurzanleitung.

### AUFBAU

#### Anschluss des Telefons

Telefonkabel an die Telefonanschlussbuchse (A) und an den Telefonanschluss in der Wand anschließen (B).

Das Spiralkabel des Handapparats an die Basisstation anschließen.

Die Netzteil-Klinke an die Basisstation und an das Ladegerät (C), danach den Netzteilstecker an eine Wandsteckdose anschließen (D).

**Hinweis:** Ausschließlich das mit dem Telefon mitgelieferte Netzteil verwenden.

#### Anschluss des Akkupacks

Die Klinke des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates einstecken.

Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen.

Die Abdeckung flach an das Batteriefach legen und aufwärtsschieben, bis sie einrastet.

#### Akkupack laden

Das Akkupack beim ersten Ladevorgang mindestens 16 Stunden laden.

### ÜBERBLICK

#### Basis

##### 1- LCD DISPLAY

##### 2- BELEGT ( ):

Eingeschaltet während eines Gesprächs.

##### 3- KLINGEL-Licht ( ):

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht. Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Memos oder Nachrichten im Anrufbeantworter gespeichert sind.

##### 4- MENÜ/OK ( ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

In Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.

##### 5- TELEFONBUCH ( ):

In Bereitschaft: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

##### 6- ANRUFE (ANRUFLISTE) ( ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

##### 7- INT/STUMM/LÖSCHEN ( / / ):

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Stufe zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

In Bearbeitung / Vorwahlmodus: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

In Bearbeitung / Vorwahlmodus: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen

Während eines Gesprächs: Drücken, um das Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Wenn es klingelt: Drücken, um die Klingel der Basisstation stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen System-Handapparat zu kommunizieren.

##### 8- MEMORY-TASTEN

##### (3- FOTO-KURZWAHLTASTEN; 1 MEMORY-TASTE - M4)

Im Bereitschaftsmodus: Wählen Sie die Telefonnummer an und drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang auf der gewünschten Fototaste bis zum Pipton.

**Hinweis:** um durch eine Fototaste anzurufen, drücken Sie auf der Fototaste.

##### 9- LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG ( ):

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE- VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

##### 10- LAUTSPRECHER ( ):

Im Bereitschaftsmodus oder im Anzeigemodus Telefonbuch / Anrufliste / Wiederwahlliste:

Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen.

##### 11- ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERN (\*), RAUTE (#)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer einzufügen.

0 Taste im Vorwahl- oder Bearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Pause einzufügen.

##### 12- NAVIGATIONSTASTEN

##### AUF ( ):

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs oder Wiedergabe einer Nachricht vom AB: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

##### WIEDERHOLEN / AGN ( ):

Im Bereitschaftsmodus: drücken und halten, um AGN aufzuzeichnen. Drücken, um AGN abzuspielen.

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurückzugehen.

##### MEMO / SCHNELL VORWÄRTS ( ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um ein Memo aufzuzeichnen.

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen.

##### AB / WIEDERWAHLLISTE ( ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs oder Wiedergabe einer Nachricht vom AB: Drücken, um die Lautstärke zu verringern.

##### 13-ANTW EIN/AUS ( ):

In Bereitschaft: Drücken, um den Anrufbeantworter EIN oder AUS zu schalten.

##### 14- ABSPIELEN / STOPP ( / ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um Nachrichten abzuspielen.

Während des Abspielens der AB-Nachrichten: Drücken, um Abspielen der Nachrichten zu stoppen.

##### 15- LÖSCHEN ( ):

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um die aktuell abgespielte AB-Nachricht zu löschen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um alle alten Nachrichten zu löschen.

##### 16- RÜCKRUF ( ):

Während eines Gesprächs: Drücken, um Rückruf zu aktivieren zur Verwendung mit Telefonnetzdiensten wie "Anklopfen" während eines Gesprächs.

Während des Abspielens von Nachrichten: Drücken, um den Anrufer zurückzurufen, wenn die Nummer des Anrufers verfügbar ist.

### Handapparat

##### 17- HÖRMUSCHEL

##### 18- LCD-DISPLAY

##### 19- LADELEUCHE ( ):

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

##### 20- MENÜ / OK ( ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

##### 21- AUF / ANRUFLISTE ( ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

##### 22- SPRECHEN EIN ( ):

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

##### 23- UNTEN/WIEDERWAHLLISTE ( ):

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

##### 24- FREISPRECHANLAGE ( ):

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen.

Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten.

Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

##### 25- MIKROFON

##### 26- LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG ( ):

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.



## 27- ABBRUCH/STUMM ( )

**Im Hauptmenü-Modus:** Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

**Im Untermenü-Modus:** Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

**Im Untermenü-Modus:** Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

**Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen:** Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

**Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen:** Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

**Während des Klingelns:** Drücken, um die Klingel des Handapparats stumm zu stellen.

**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

## 28- SPRECHEN AUS ( )

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um Gespräch beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.


**Im Menü/Bearbeitungsmodus:** Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen


**Im Menü/Bearbeitungsmodus:** Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.


**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken und halten, um den Handapparat auszuschalten.

drücken und halten, um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

## 29- ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERN()RAUTE ()

**Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus:** Drücken, um eine Ziffer / Zeichen / .

 Taste im Bereitschaftsmodus einzufügen: Drücken und halten, um die Tastensperre zu aktivieren / deaktivieren.

 Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um die Klingel ein- / auszuschalten.

**0** Taste in Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Pause einzufügen.

## 30- R



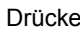

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, wenn beim Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert wurde.

## 31- TELEFONBUCH ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

## MENÜ EINSTELLUNG




**Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:**

Die **Menü/OK** () Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen. Mittels der  -Tasten kann ein Eintrag markiert und durch Drücken der **Menü/OK** () Taste bestätigt werden.

Der voreingestellte **PIN**-Code lautet **0000**


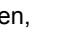

### Beispiel:

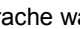


**Einstellen der Sprache an der Basisstation**

**MENÜ/OK** () drücken, dann   Sprache wählen,

**MENÜ/OK** () drücken, dann   gewünschte Sprache wählen und zur Bestätigung **MENÜ/OK** () drücken.

**Einstellen der Sprache auf dem Handapparat**

**MENÜ/OK** () drücken, dann   HA-Einstellungen wählen,

**MENÜ/OK** () drücken, dann   Sprache wählen,

**MENÜ/OK** () drücken, dann   gewünschte Sprache wählen und dann zur Bestätigung **MENÜ/OK** () drücken.

### Basis

#### TELEFONBUCH

►ANSICHT►HINZUFÜGEN►BEARBEIEN►LÖSCHEN►ALLE LÖSCHEN►TB STATUS

**ANRUFLISTE:** ►VERSÄUMT ►EINGEHEND ►AUSGEHEND

**DATUM & ZEIT:** ►ZEITFORMAT ►UHR EINSTELLEN

#### SPRACHE

►ENGLISH►DEUTSCH►FRANÇAIS►ITALIANO►NEDERLANDS...

#### EINSTELLUNGEN

►KLINGELTONEINSTELLUNG ►LÖSCHEN

►WÄHLVERFAHREN ►FLASH-DAUER ►TASTENTON ►PIN ÄNDERN ►BS VOREINGABE

**PAGING ALLE HA**

#### ANMELDUNG

#### ANRUFBEANTW

►NACHR. ABSP. ►ALLE LÖSCHEN ►MEMO ►AB EIN/AUS

►AB EINSTELLUNGEN (ANTWORTMODUS, ANSAGEN, ANTWORTVERZÖGERUNG, AUFNAHMEZEIT, AB-SPRACHE, MITHOEREN, FERNABFRAGE, KOMPRESSION, PIN ÄNDERN, AB RÜCKS.)

#### Handapparat

#### TELEFONBUCH

►LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: ►EINTRAG NEU ►ANSEHEN ►AENDERN

►LÖSCHEN

►ALLES LÖSCHEN ► TB STATUS ►DIREKTWAHL

#### ANRUFLISTE

►LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: ►NR SPEICHERN ►LÖSCHEN ►ALLE LÖSCHEN

►DETAILS ►ANRUFART

#### BS EINSTELLUNGEN

►RUFTON ►RUFTONLAUTSTÄRKE ►MT ABMELDEN

►WÄHLVERFAHREN ►FLASH ZEIT ►PIN ÄNDERN

#### HA EINSTELLUNGEN

►RUFTON ►TOENE ►BASIS WÄHLEN ►SPRACHE ►MT NAME

►MT DISPLAY ►AUTO-ANTWORT

**DIREKTWAHL:** ►M1-M2-M3

#### DATUM & ZEIT

►DATUMSFORMAT ►ZEITFORMAT ►ZEIT EINSTELLEN

►DATUM EINSTELLEN

**WECKER:** ►EIN ►AUS

**ANMELDEN:** ►BASISSTATION 1, 2, 3 oder 4

**RUECKSETZ:** ►PIN? ----

#### ANRUFBEANTW

►NACHR. HOEREN ►ALLE LÖSCHEN ►MEMO ►AB EIN/AUS

►AB EINSTELLUNGEN (ANTWORTMODUS, AB SPRACHE, ANSAGEN, ANTWORTVERZÖGERUNG, AUFNAHMEZEIT, KOMPRESSION, MITHOEREN, FERNABFRAGE, PIN ÄNDERN)

#### REGISTRIERUNG & ABMELDUNG

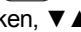


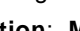
**Hinweis:** Handapparat und Basisstation sind vorregistriert.

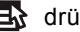

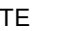
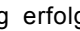
Es können für eine einzelne Basisstation bis zu vier Handapparat registriert werden.

im Falle von Neuregistrierung ist der PIN-Code **0000**.

#### Registrierung eines Handapparats

**Am Handapparat:** **MENÜ/OK** () drücken,   REGISTRIERUNG

wählen, **MENÜ/OK** () drücken,   BASISSTATION (1-4) wählen, **MENÜ/OK** () drücken, PIN eingeben.

Zugleich an der **Basisstation:** **MENÜ/OK** () drücken,   REGISTRIERUNG wählen, **MENÜ/OK** () drücken, um BITTE WARTEN zu sehen (wenn die Registrierung erfolgreich war, ertönt ein Bestätigungston).

#### Abmeldung

**Auf der Basisstation:** **MENÜ/OK** () drücken,   EINSTELLUNGEN wählen, **MENÜ/OK** () drücken.


  LÖSCHEN HA wählen, **MENÜ/OK** () drücken, PIN eingeben, **MENÜ/OK** () drücken.

  eine der Handapparatnummern wählen, die abgemeldet werden sollen. Zur Bestätigung **MENÜ/OK** () drücken.





## INTERCOM

### Interner Anruf

**Basisstation:** **INT/STUMM/LÖSCHEN** (*Int*//*C*) drücken,   HA 1-5 wählen, **MENÜ/OK** () drücken, um Verbindung herzustellen.

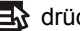




**Handapparat:** **C/STUMM** () drücken. Die gewünschte Handapparatnummer auf dem Tastenfeld eingeben. Basisstation ist "7".





### Alle Handapparate anrufen

**Basisstation:** **INT/STUMM/LÖSCHEN** (*Int*//*C*) drücken,   ALLE HANDAPPARATE wählen, **MENÜ/OK** () drücken, um Verbindung herzustellen.

**Handapparat:** **C/STUMM** () drücken. "9" auf dem Tastenfeld eingeben.





### Weiterleitung eines Auswärtsgespräch

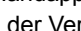
**Basisstation:** **MENÜ/OK** () drücken,   Handapparatnummer wählen, drücken  oder ) auf dem Handapparat. Nach Herstellung der Verbindung den Aufruf auf der Basisstation beenden.

**Handapparat:** **MENÜ/OK** () drücken,   INTERCOM wählen, **MENÜ/OK** () wählen.


Die gewünschte Handapparatnummer auf dem Tastenfeld eingeben. Nach Herstellung der Verbindung den Aufruf auf dem Handapparat beenden.

### Konferenzschaltung

**Handapparat:** **MENÜ/OK** () drücken,   INTERCOM wählen, **MENÜ/OK** () drücken,

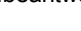
Die gewünschte Handapparatnummer auf dem Tastenfeld eingeben. Nach Herstellung der Verbindung,  drücken und halten, bis KONFERENZ erscheint.

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

**ANTW EIN/AUS** () drücken, um den Anrufbeantworter EIN oder AUS zu schalten.

### FERNGESTEUERTE VORGÄNGE

Wenn Sie nicht zuhause sind, kann der Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl angerufen werden, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

- Von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl einwählen.
- Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt,  drücken.
- Die 3-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist **0000**).
- Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

A	Funktionen	
	<b>Während keine Nachricht abgespielt wird</b>	<b>Während eine Nachricht abgespielt wird</b>
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen.
6		Vorwärts springen, um nächste Nachricht abzuspielen.
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten.	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

#### HINWEIS:

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus

ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt ist, wechselt der Antwortmodus in NUR ANTWORTEN.

Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden, bevor sie abgehört wurden.

## GUARANTEE

Geemarc™ bietet AMPLIDECT COMBI 295 eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com/de**. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinanderggebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

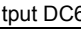
**WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.**

## ERKLÄRUNG:

### CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLIDECT COMBI 295 die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden.

Strahlungsleitung	<250 mW
<b>Strom</b>	
Basis und Ladegerät	100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	Wieder aufladbar NiMH-Akku mit 2.4V/500 mAh

**Elektrische Anschlüsse:** Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Montage des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.

**Telephone connection:** Die im Telekommunikationsnetz vorherrschende Spannung wird gemäß der Norm EN62368-1 klassifiziert als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).

## VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

**Manufacturer:** Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.  
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt

UGAMPLIDECTCOMBI295\_Ge\_A3\_V1.5