



Sonic Alert
America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom vækkeur & Bed Shaker med 5 niveauer af dæmpning & USB-ladning

Model SBT600ss



BRUGSANVISNING

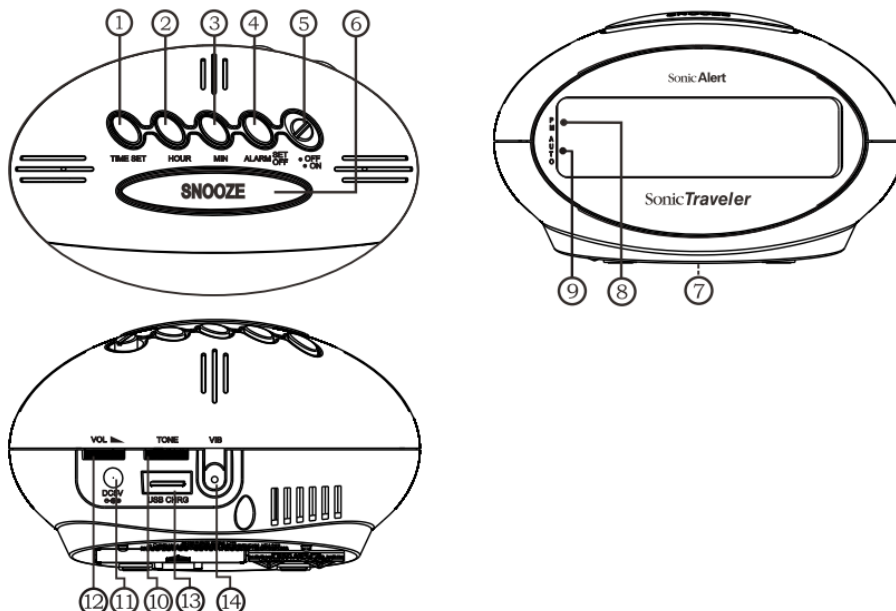
DANSK

VIGTIGT – Læs disse instruktioner grundigt inden brug og behold manualen for fremtidig brug.
Se brugsanvisninger på bagsiden.
– Brug kun den medfølgende adapter til enheden.

Advarsel: For at undgå brand eller elektriske stød bør den ikke udsættes for regn eller fugt.
Inden den tilsluttes en stikkontakt, vær sikker på at kravene angivet på apparatet modsvarer den tilgængelige strømkilde, f.eks. AC100-240V~, 50/60 Hz.

- Ventilation bør ikke blokeres ved at tildække ventilationsåbninger med ting som aviser, duge, gardiner etc.;
- Ingen åben ild så som levende lys bør placeres på apparatet.
- Den må ikke udsættes for dryppen eller sprøjten og ingen objekter med væsker så som vaser må placeres på apparatet.
- Stil ikke produktet i lukkede boghylder eller reoler uden ordentlig ventilation.
- Hvor den primære stikkontakt bruges som afbryder-enhed skal afbryder-enheden fungere fejlfrit.

INSTRUKTIONER



Funktioner vist på diagrammet for oven:

1. Sæt tiden	8. PM-indikator
2. Time	9. Auto (Alarm PÅ-indikator)
3. Min	10. Tone
4. Sæt alarm / Af	11. DC5V input
5. Alarm På/Slukket	12. Lydniveau
6. Snooze / Dæmper	13. USB-ladning
7. Batteridæksen	14. Vibrator Input

Testmenu:

- 1) Tryk og hold Snooze og Tid-knapperne nede i 3 sekunder for at komme ind i testmenuen. Displayet vil svise "7ES7" for at indikere, at det er i TESTmenuen.
- 2) Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 1 minut, vil den gå ud af testmenu og vende tilbage til time-menuen.
- 3) Tryk på en hvilken som helst knap inden for 1 minut (bortset fra Snooze & Time-knapperne, som ikke har noget effekt), og den vil gå ud af testmenuen med det samme.
- 4) I testmenuen vil enheden demonstrere enhedens funktioner, f.eks. buzzeren, flashing og Vibrator (hvis vibratoren er sat til)
- 5) Når du er klar i testmenuen, tryk på en hvilken som helst knap inden for 1 minut (bortset fra Snooze & Time-knapperne, som ikke har noget effekt), og den vil gå ud af testmenuen med det samme.

Indstilling af den korrekte tid –

- 1) Tryk og hold knappen **Time Set (1)** nede samtidig som du trykker på **Hour Button (2)** for at hurtigt ændre urets display indtil den rigtige time vises.
- 2) Tryk og hold knappen **Time Set Button (1)** nede med du samtidigt trykker på knappen **Minute Button (3)** for at hurtigt ændre urets display indtil de rigtige minutter vises.
En **lysende prik (8)** til venstre på urets display indikerer at tiden er PM. Ved AM-visning af tiden lyser prikken ikke op.

Indstilling af alarmtiden –

- 1) Tryk og hold knappen **Alarm Set Button (4)** nede mens du samtidigt trykker på knappen **Hour Button (2)** for at hurtigt ændre på alarmdisplayet indtil timen passer.
- 2) Tryk og hold knappen **Alarm Set Button (4)** nede mens du samtidigt trykker på knappen **Minute Button (3)** for at hurtigt ændre på alarmdisplayet indtil minutterne passer.
- 3) Sørg for at alarmtiden er korrekt sat til AM eller PM. den **lysende prik (8)** indikerer PM. Slip knapperne HOUR og MIN inden ALARM-knappen slippes.

Valg af 12 eller 24 timers format –

Tryk og hold knappen **Hour button (2)** nede i 6 for at komme ind i menuen for valg af time, slip knappen **Hour (2)** når displayet viser "12 H" or "24 H". Tryk og slip hour-knappen for at vælge mellem 12 eller 24 timer. Hvis der ikke gøres noget vælg inden for 4 sekunder, vil det sidst viste time-formaet blive valgt og displayet vil vende tilbage til den normale timemenu igen.

Vågne til alarm–

- 1) Hvis det kun er buzzeren der behøves, skal vibratoren ikke sættes til.
- 2) Sæt det ønskede niveau ved at bruge **Vol-knappen (12)** for buzz-lyd.
- 3) Hvis det kun er vibrator der behøves, skal vibratoren sættes i **Vibrator-stikket (14)** og der slukkes for volumen på **Vol-hjulet (12)**.
- 4) Hvis både buzzeren og vibratoren skal bruges, sættes vibratoren til og volumen sættes på det ønskede niveau.
- 5) Sæt vækketiden på alarm ifølge instruktioner for indstilling af alarmtiden for oven.

Justering af varigheden på alarmen

Standardindstillingen for varigheden på alarmen er 30 minutter, men du kan sætte varigheden til mellem 1 minut og 59 minutter som du ønsker. For at justere alarmens varighed:

- Tryk og hold knappen **AL. SET (4)** nede i seks sekunder. Urets display vil vise standardindstillingen for varigheden på alarmen '30', slip AL. SET-knappen.
- Tryk på knappen **MIN (3)** for at justere alarmens varighed til den ønskede indstilling, fra 1 til 59 minutter.

- Når displayet viser den ønskede varighed for alarmen, vil den gå tilbage til den normale ur-menu efter 3 sekunder. Den nye indstilling for varighed for alarm er den nye standardindstilling og vil forblive det i hukommelsen ind du ændrer det igen.

Slukke for alarmen –

Alarmen kan slukkes for midlertidigt for dagen eller slukkes helt permanent.

- 1) Når alarmen lyder, trykker du bare på knappen **AL off (4)** og alarmen vil slukke for sig selv for dagen og gå i gang igen næste dag samme tid, hvis indstillingerne ikke er ændret.
- 2) For at slukke permanent for alarmen sættes knappen **ON/OFF (5)** til off-position. Alarmen vil ikke gå i gang igen, før knappen **ON/OFF (5)** er sat til on-positionen igen.

Snooze–

SNOOZE -knappen (6) – tryk på den efter, at alarmen har ringet. Alarmen vil blive slukket for 9 minutters ekstra søvn. Alarmen vil begynde inden efter 9 minutter. Du kan gentage mange gange op til 119 minutter.

Justering af snooze-tiden

Den forudindstillede indstilling for snooze er 9 minutter men du kan justere snooze tiden til mellem 1 minut og 30 minutter efter eget valg. For at justere snooze-tiden:

- Tryk og hold knappen **SNOOZE (6)** nede i fire sekunder. Urets display vil vise standard snooze-tiden '9'. Slip snooze-knappen.
- Tryk på knappen **MIN (3)** for at justere snooze tiden til den ønskede indstilling fra 1 til 30 minutter.
- Når displayet viser den ønskede snooze-tid vil det vende tilbage til den normale ur-menu efter 3 sekunder. Den nye indstilling for Snooze-tid er den nye standard og vil være det i hukommelsen indtil du ændrer det igen.

Volume –

For at justere lydstyrken drejer du på hjulet **Volume (12)** indtil du har fundet ønskede niveau.

Tone –

Juster toner ved at rotere hjulet **Tone (10)** indtil du har nået det ønskede niveau.

Dæmpning

Der er 5 niveauer af lysstyrke for LED-displayet. Tryk på knappen **SNOOZE (6)** en gang for at ændre displayets lysstyrke. Lysstyrken vil køre fra 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (fra lys til dunkel og så fra dunkel til lys).

BEMÆRK: Dæmpningsfunktionen vil ikke fungere når uret er i snooze-menu.

Bed Shaker / Vibrator

- 1) Sæt stikket til bed shaker I bag på uret i **VIBRATOR input (14)**.
- 2) Placer vibratoren under madrassen eller puden.

USB-ladning

Dette vækkeur er udstyret med en praktisk USB-ladeport på bagsiden, som gør dig i stand til at oplade mange mærker af mobiltelefoner, transportable musikafspillere og andre håndholdte enheder som er udstyret med USB-kabler. Nominel belastning for USB-ladeporten er 500mA.

For at lade din enhed forbindes USB-ladekablet, som fulgte med din håndholdte enhed, med **USB-ladeporten (13)** bag på dette vækkeur. Se på ladningsindikatoren på din enhed for at bekræfte at den lader.

Bemærk: Ladningstid vil variere afhængig af hvilken strøm din enhed kræver. Derfor vil det tage længere tid at lade nogle enheder end andre.

Batteri backup –


For at bruge batteriet backup kan du installere 1 styk 9V batteri i bunden af uret under **batterilåget (7)**. Bemærk at LED-displayet ikke vil vises under strømafbud, men uret vil stadig køre og holde den korrekte tid inden strømmen kommer tilbage.

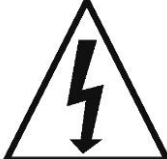

BEMÆRK: For det bedste resultat anbefales det at skifte batteri hver 6-8 måneder. Hvis uret ikke skal bruges i et stykke tid, anbefales det at fjerne batteriet for undgå lækage.

DC 5V strømudtag–

Sæt DC strømstikket i bag på uret hvor der står DC5V  IN (11).


GENERELLE DATA

UL listet strømadapter: AC100-240V~, 50/60Hz
Strømforbrug: Adapter Output: DC5V , 800mA
USB-ladning: Nominel belastning: 500mA

 <p>Lynet og pilespiden inden i trekanten er en advarsel der advarer dig om farlig spænding inden i produktet.</p>	<p>ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOK, MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) AF PRODUKTET IKKE FJERNES. INGEN UDSKIFTelige DELE INDEN I. VED SERVICE HENVISES TIL DIN SONIC ALERT FORHANDLER.</p>	 <p>Udråbstegnet i trekanten er advarsel, der advarer om vigtige instruktioner der følger med produktet.</p>
---	---	---

ADVARSEL: FOR AT UNDRÉ BRAND ELLER STØD MÅ DETTE UDSTYR IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Normal funktion kan blive forstyrret ved stærke elektromagnetiske forstyrrelser. Hvis dette er tilfældes, kan normal funktion genoptages ved at tage adapteren ud og sætte den i igen. Hvis den ikke får funktionen tilbage igen, prøv at flytte enheden til en anden placering.

- Opmærksomheden henledes på de miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
-  dette indikerer separate indsamling for elektrisk og elektronisk udstyr.

SONIC ALERTS 2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Fra det øjeblik hvor du køber dit produkt fra Sonic Alert garanterer Sonic Alert det i en periode på 2 år. Garantien dækker ikke over ulykke, negligering eller ødelæggelse af nogle dele. Produktet er dækket af den juridiske garanti om konformitet som den er skrevet i gældende lovgivning. Vigtigt: din kvittering er den af garantien og skal gemmes og fremvises i tilfælde af en garantireklamation. After sales telefonnummer: +44(0)1707 384438

***Geemarc Telecom, 5 Swallow Court, Swallowfields,
Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB, UK***

DIREKTIVER FOR GENBRUG

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-direktiv er blevet brugt for produkterne i deres sidste levetid og er genbrugt på den mulige måde.

Når dette produkt er gået i stykker, beder vi dig om at ikke smide det i din skraldespand. Vær venlig at bruge en af de følgende muligheder for bortskaffelse:

- Fjern batterierne og put deponer dem i passende beholder på lossepladsen. Deponer produktet på lossepladsen
- Eller giv dit gamle produkt til forhandleren. Hvis du købet et nyt, burde de acceptere det. Hvis du derfor respekterer disse instruktioner, sikrer du menneskeligt helbred og beskyttelse af miljøet.



CE deklARATION: Hermed erklærer Sonic Alert at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante lovgivninger om Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU og om lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/53/EU (hvis det er relevant).

Deklarationen om konformitet kan ses på www.geemarc.com

Distribueret af :  **United Kingdom**

5 Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City,
Hertfordshire, AL7 1SB,
For product support: 01707 384438
www.geemarc.com

