

Vækkeur med
shaker



Dk

BRUGERVEJLEDNING

Se venligst vores hjemmeside: www.geemarc.com for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, som du skal være opmærksom på!

INSTALLATION

Sæt AC/DC-adapteren i en stikkontakt og tilslut derefter DC-stikket til bagsiden af enheden. Dit ur er klar til at arbejde for dig.

Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.

SIKKERHEDSKOPIER BATTERI INSTALLATION

Dit ur kræver et AA-batteri (medfølger ikke) for at give uret ekstra strøm i tilfælde af en midlertidig strømafbrydelse.


1. Placer enheden med forsiden nedad på en flad og blød overflade.
2. Åbn batteridøren, der er placeret i bunden af enheden.
3. Sæt et nyt AA-batteri i batterirummet ved at overholde den korrekte '+' og '-' polaritet.
4. Luk batteridøren.

Det er ikke nødvendigt at indsætte et reservebatteri, for at uret kan fungere; dog, **Backup-batteriet holder uret i gang i tilfælde af strømafbrydelse eller hvis AC/DC-adapteren ikke er tilsluttet. Hvis vekselsstrømmen afbrydes, vil alarmen og baggrundsbelysningen ikke fungere.**

Kontroller batteriets tilstand efter et år, og udskift det gamle batteri om nødvendigt. Et utæt batteri kan ødelægge dit ur.

FORSIGTIGHED: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.

ADVARSEL: Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

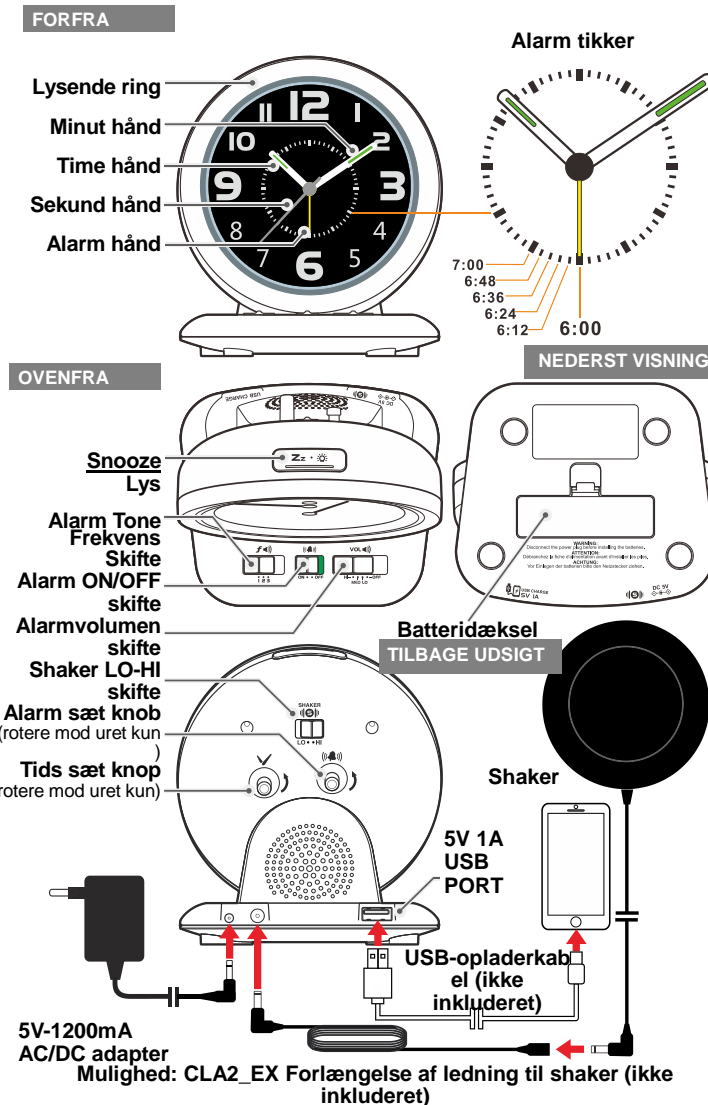

TIL AT INDSTILLE TID

Drej knappen mod uret for at indstille uret til den aktuelle tid.

Bemærkning: Du må ikke dreje knappen eller urskiverne med uret, da det kan beskadige urværket.

INDSTILLING AF ALARMTIDEN (standard er 6:00)

Drej den længere alarmknap mod uret for at indstille alarmviseren til det ønskede alarmtidspunkt. Hvert indre segment eller kryds står for 12 minutter.

For at opnå minimal tolerance i alarmtiden skal du placere alarmviseren præcist ved at pege på det ønskede alarmtidskryds.

FOR AT VÆLGE ALARM TÆND/SLUK

For at tænde alarmfunktionen skal du når som helst sætte skydeknappen til ON-positionen, som viser et grønt indslag. For at slukke for alarmfunktionen skal du når som helst sætte skydeknappen i positionen OFF.

FOR AT VÆLGE ALARMTONEFREKVENNS

Dias knappen til position 1 eller 2 eller 3 for at vælge alarmfrekvenstone under aktiv alarm.

- 1 (lav tone, 800 Hz)
- 2 (midten af tone, 1 KHz)
- 3 (høj tone, 1,5 KHz)

FOR AT VÆLGE ALARMVOLUMEN

Dias knappen for at indstille HI eller MED eller LO eller OFF for at vælge lydniveauet for alarmsummeren under aktiv alarm.

FOR AT VÆLGE VIBRATOR HI/LO

Dias knappen til position HI eller LO for at vælge vibrator på højt eller lavt niveau under aktiv alarm. Hvis du ikke ønsker at bruge vibratoren, skal du ikke tilslutte vibratoradapteren.

FOR AT STOPPE ALARMFUNKTIONEN

Når alarmen er aktiv, skubbes knappen til positionen OFF.

TIL BRUG AF SNOOZE

Når alarmen lyder, skal du trykke på en gang, stoppes alarmen midlertidigt. Alarmen vil blive aktiveret igen efter 5 minutter.

FOR AT BRUGE HI-MED-LO-DÆMPEREN (TIDSCIFRE)

Der er en lysstyrkeregulering med 3 niveauer for baggrundsbelysningen. Tryk på for at justere lysstyrken (HI / MED / LO) for baggrundsbelysningen. Dette kan kun gøres, når enheden ikke er i lyd.

AT BRUGE RINGEN AF LEDET LYS

1. Tryk og hold knappen for at tænde LED-ringene, og lysstyrken af LED-ringene (Hi-Med-Lo) svarer til lysstyrken af tidsdisplayet (Hi-Med-Lo).
2. Når LED-ringene lyser op, skal du trykke på knappen én ad gangen for at justere lysstyrken på tidsdisplayet og

lysstyrken på LED-ringen i overensstemmelse hermed.

- Tryk og hold **Zz** •  knappen for at slukke for LED-lysringen.

TIL AT OPLADE DIN MOBILTELEFON MED USB-PORT

Tilslut opladerkablet (medfølger ikke) til din mobilenhed til USB-porten af A-typen bag på enheden, og tilslut derefter den anden ende til din mobilenhed. Uret oplader mobilenheden automatisk.

Bemærk:

- Sørg for, at det kabel, der følger med din mobiltelefon, bruges til opladning.
- Sørg for, at den originale adapter, der følger med urradioen (5V 1,2A), bruges til at forsyne uret med strøm. Hvis du bruger andre adaptere, kan det være, at telefonen ikke oplades.
- Det er ikke muligt at oplade en iPad® eller en notesblok via USB-stikket på dette ur.
- Når alarmerne lyder/virker, kan du ikke oplade telefoner osv. ved hjælp af USB-porten.

FEJLFINDING

Hvis uret ikke fungerer korrekt, hvilket kan skyldes elektrostatisk udladning eller anden interferens, skal du trække stikket ud af DC-stikket for at afbryde vekselstrømmen (og fjerne backup-batteriet), lade det stå i et par minutter og derefter sætte adapteren i for at give uret ny strøm.

PLEJE AF DIT PRODUKT

- Placer uret på en stabil overflade, væk fra direkte sollys eller overdreven varme eller fugt.
- Beskyt dine møbler, når du placerer enheden på naturtræ og lakeret finish, ved at bruge en klud eller et beskyttende materiale mellem enheden og møblet.
- Rengør enheden med en blød klud, der kun er fugtet med mild sæbe og vand. Stærkere midler som benzen, fortyndere eller lignende materialer kan beskadige enhedens overflade. Sørg for, at enheden er trukket ud af stikkontakten, før den rengøres.
- Fjern reservebatteriet, hvis uret ikke skal bruges i en måned eller længere tid for at undgå mulig korrosion. Hvis batterirummet bliver korroderet eller snavset, skal du rengøre rummene grundigt og udskifte batteriet.

SPECIFIKATIONER

Standard indstillingerne	Tid	10:10
	Alarm	6:00
	Alarm ON/OFF	OFF
	Frekvens af alarmlyd	1 (800Hz)
	Alarmvolumen	OFF
	Alarm Vibrationsniveaul	HI
Varighed af dvaletid	5 minutter	

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejls opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

- Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
- Batterier (hvis disse anvendes).
- Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
- Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, medmindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Bemærk: Garantien gælder kun i Danmark.

DEKLARATIONER

Test og godkendelser: Geemarc Telecom SA erklærer herved, at dette produkt er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse med CE-direktivet 2014/53/UE.

Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.geemarc.com

Elektrisk forbindelse: Apparatet har ingen indbygget tænd/sluk-knap. For at slukke apparatet skal strømforsyningen afbrydes. Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig, når apparatet installeres.

Miljøinformation: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med det, bedes du fjerne batterierne og benytte en indsamlingsordning etableret til formålet. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af produktet skal der benyttes en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Distribueret af:



2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe, Frankrig

www.geemarc.com



Dette produkt er lavet i Kina til Geemarc Telecom

Hua Xu Electronics Factory
HX075-0501200-AG-001 / HX075-0501200-AB
AC100 – 240V ~ 50/60Hz
DC5V 1.2A 6.0W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: ≥75%
Strømforsøg uden belastning: ≤0.1W