





BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Basisstation / Handset

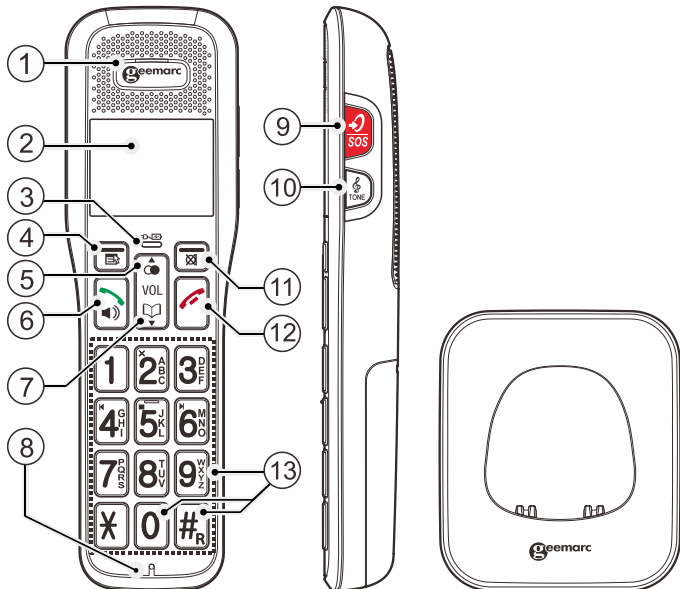

Het basisstation aansluiten

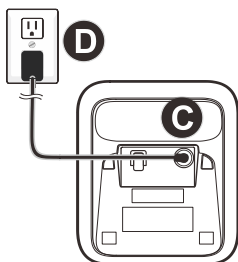

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

INHOUD van het PAKKET

1 Draadloze handset, 1 Voedingsadapter, 3 NiMh batterijen, 1 Beknopte gebruikershandleiding.

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden.

Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+ / -).

Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

UW HANDSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKEN

Nadat u de batterijen erin heeft gezet, wordt u gevraagd om uw taal te kiezen m.b.v. de **▼/▲(5/7)** toetsen. Druk op **MENU/OK** (4) om dit te bekrachtigen; voer daarna de datum in m.b.v. het toetsenbord en bekrachtig dit door op **MENU/OK** (4) te drukken. Voer de juiste tijd in m.b.v. het toetsenbord en bekrachtig dit door op **MENU/OK** (4) te drukken.

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset is vooraf aangemeld op het basisstation.

Tot maximaal 4 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

Een handset registreren

Op het **basisstation**: Druk op het basisstation op **/HANDSET LOCATOR** en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om toegang tot de registratiestand te krijgen.

Tegelijkertijd op de **Handset**: Druk op **MENU/OK** (4). Gebruik **▼/▲(5/7)** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen en druk op **MENU/OK** (4).

Gebruik **▼/▲(5/7)** om **REGISTREREN** te kiezen. Druk op **MENU/OK** en **BEZIG MET REGISTREREN** wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

OVERZICHT

Handset

1. OORDOPJE

2. LCD DISPLAY

3. OPLAADLAMPJE ()

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

4. MENU/OK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

5. OMHOOG/OPROEPLIJST ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.
Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

6. SPREKEN AAN () IN DE LUIDSPREKERSTAND ()

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

Telefoon is actief: Druk hier nogmaals op om over te gaan naar de luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

7. OMLAAG / TELEFOONBOEK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

8. MICROFOON

9. VOLUMEVERSTERKER / SOS () / SOS

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 3 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

10. TOON

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de hoge of lage frequentie te verhogen.

11. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) ()

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.


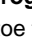
12. SPREKEN UIT ()

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

13. ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE (),

HEKJE ()

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal/teken/  /  toe te voegen.

tijdens een gesprek: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer

bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

FUNCTIES

U vindt alle functies in de hoofdhandleiding AMPLIDECT595 ULE

INTERCOM

Interne oproep

1) Druk op **MENU/OK** () en **▼/▲** om **INTERCOM** te selecteren. Druk nogmaals op **MENU/OK** ().

2) Kies het nummer van de gewenste handset, **Basisstation** of **ALLEMAAL** en druk op **MENU/OK** ().


Als u een oproep ontvangt op het basisstation in de luidspreker stand zal de oproep automatisch overgezet worden op de handset zodra de handset uit de oplader wordt genomen.

Alle handsets oproepen

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies **ALLEMAAL**.

Een externe oproep overzetten

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies het nummer van de gewenste handset m.b.v de **OMHOOG/OMLAAG**-toets.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep af door op de handset  in te drukken.

Conferentiegesprek

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies het nummer van de gewenste handset m.b.v de **▼/▲** toetsen.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, drukt u op **X** en houdt deze ingedrukt totdat CONFERENTIE verschijnt.

NB: Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden.

ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (AD 595 ULE HS) heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.


VERKLARINGEN



CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

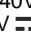RF vermogen	< 250mW
Oplader	Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op

www.geemarc.com.

Geemarc Telecom

2 rue Galilée, 59760 GRANDE-SYNTHE, FRANCE

Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

This product is made in China To Geemarc Telecom

QUGAMPLIDECT595ULE_HS_NL_V1.3