

Draadloze geluidssensor-alarm (babyfoon)



Nederlands


Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er mogelijk belangrijke updates en wijzigingen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn.


Inhoud van de verpakking

De AC140 (AMPLICALL™140) doos bevat de volgende items:

- 1 AC140-basisstation
- 1 AC/DC-voedingsadapter 5V DC/ 1A/ 1W
- 1 Britse en 1 VDE-stekkeradapter
- 1 microsensor (50 cm)
- 1 dubbelzijdige zelfklevende sticker voor montage van de microsensor
- 1 externe kabel met 3,5 mm-stekker/aansluiting voor microsensor (1,5 m)
- 1 gebruikershandleiding
- 2 schroeven en 2 pluggen
- 1 boorsjabloon
- 2 stuks deurbelpictogrammen en 2 stuks babypictogrammen

BESCHRIJVING

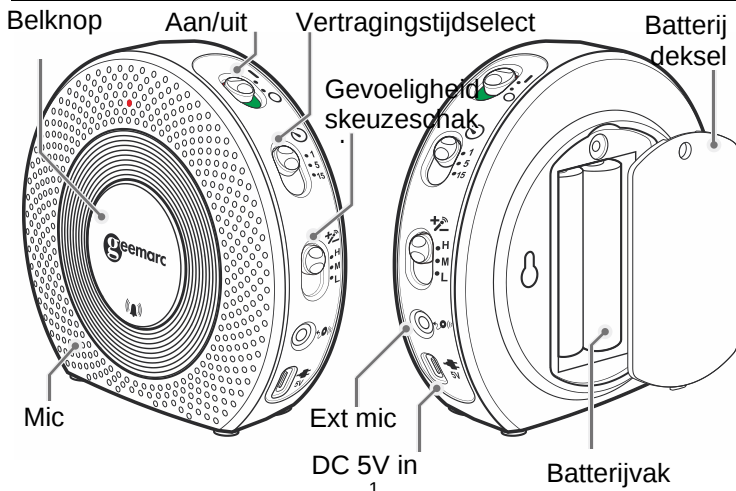


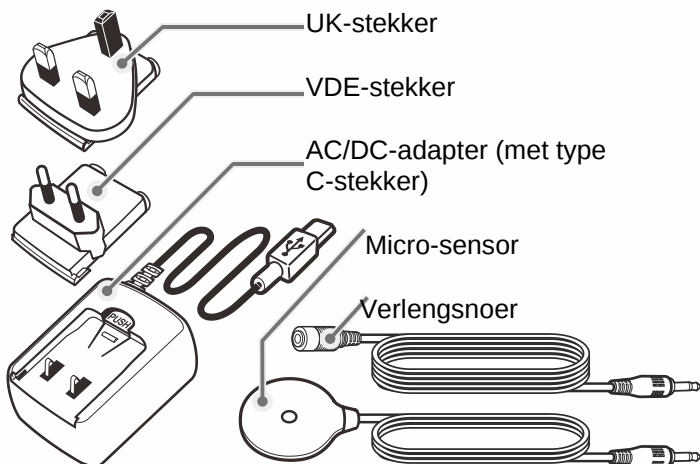

Sluit uw apparaat aan


Uw AC140 wordt geleverd met een voedingsadapter. U moet deze aansluiten op de AC/DC-aansluiting rechtsonder.

Wanneer u de AC/DC-voeding gebruikt, moet u ook de batterijen plaatsen. Anders krijgt u een melding dat de batterij bijna leeg is op de AC140.

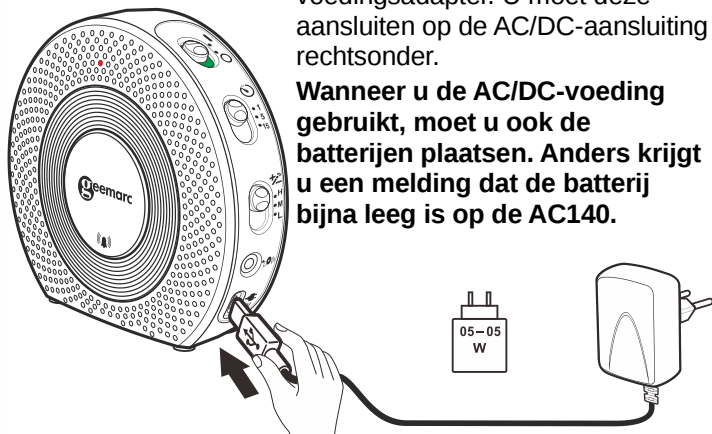

U kunt 2 alkalinebatterijen AA 1,5 V (niet meegeleverd) toevoegen als u wilt dat uw apparaat werkt in de noodstroommodus of zonder voedingsadapter.

Volg de onderstaande procedure om de batterijen te plaatsen.

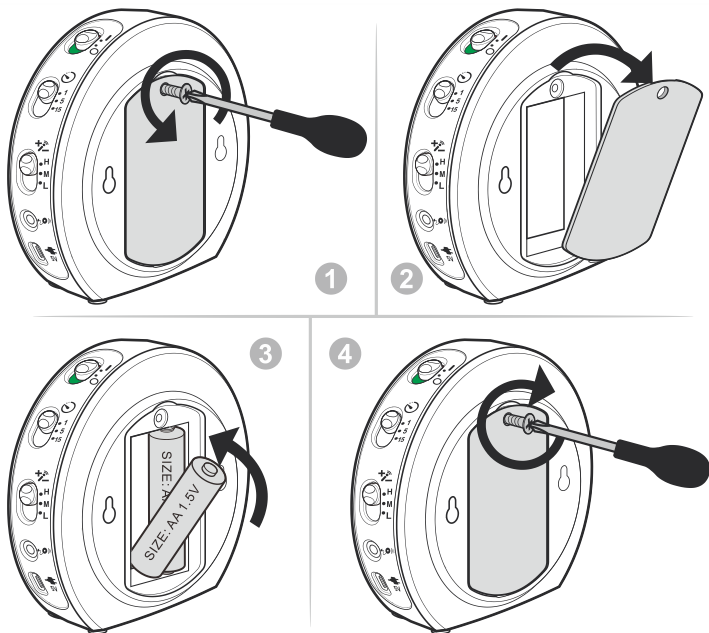

1. Draai de schroef op het batterijklepje los.
2. Open het batterijklepje.
3. Plaats de 2 alkalinebatterijen AA 1,5 V met inachtneming van de polariteit.
4. Plaats het batterijklepje terug.
5. Draai de schroef weer vast.

Pairing with the AMPLICALL receivers

AC140 werkt met de AMPLICALL-ontvangers en moet worden gekoppeld voordat het kan worden gebruikt.

Volg deze stappen om een nieuw apparaat te koppelen:

1. Ga naar de koppelingsmodus voor de AMPLICALL-ontvangers.


Houd de LEARNING-knop (●) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje in zone-icoontje #1 gaat knipperen.

2. Druk nogmaals op de LEARNING-knop (●) om naar het zone-icoontje te gaan waarmee u wilt koppelen.


Druk op de melodie selectieknoop (♪) om door de melodieën te bladeren. Als u een melodie hoort die u bevalt, druk dan tijdens de melodie op geen enkele knop.

3. Zodra het zone-icoontje en de melodie zijn geselecteerd, drukt u één keer op de knop AC140 van het apparaat om te koppelen. Als dit lukt, geven de AMPLICALL-ontvangers twee korte tonen.

Druk op de **LEARNING**-knop (●) om de koppelingsmodus te verlaten; het systeem is nu klaar voor gebruik.

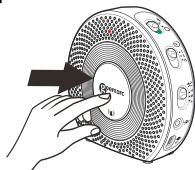

Instellingen

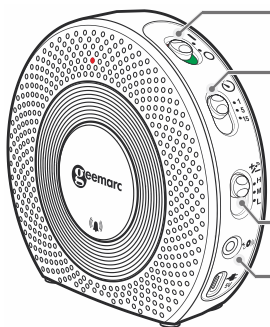

Aan/uit: Zet de schakelaar in de stand Uit (O) wanneer u het apparaat niet gebruikt.


Vertraging: Met deze schakelaar kunt u een vertragingstijd van 5, 10 of 15 seconden instellen. Als u 5 seconden selecteert, betekent dit dat de AMPLICALL-ontvangers worden geactiveerd nadat er gedurende 5 seconden continu geluid is gedetecteerd.

Gevoeligheid: Met deze schakelaar kunt u de gevoeligheid van de microfoon instellen op **Hoog, Midden of Laag**.

Ext.Mic: u kunt de externe microfoon op deze aansluiting aansluiten. De interne microfoon wordt uitgeschakeld wanneer de externe microfoon is aangesloten.

Operatie

De **interne** microfoon gebruiken:

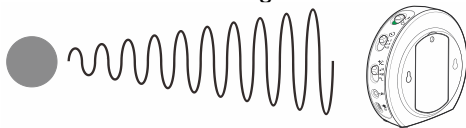


De **externe** microfoon gebruiken:



Pas de afstand (tussen de microfoon en de geluidsbron) en gevoeligheid aan op basis van het type geluidsbron en de intensiteit ervan.

Codeconflict

Als de AC140-code dezelfde is als die van een andere zender, moet u de code wijzigen. Volg hiervoor de onderstaande procedure. Nadat u de code hebt gewijzigd, moet u de belknop opnieuw koppelen.

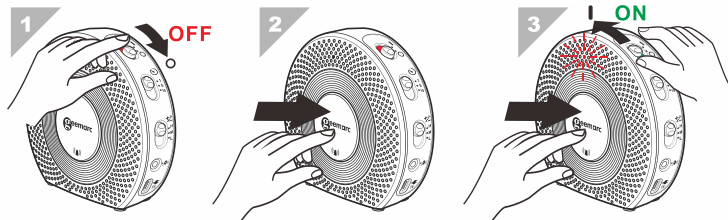


Zet de aan/uit-schakelaar in de stand OFF.

Houd de belknop ingedrukt.

Zet de aan/uit-schakelaar in de stand ON en houd de belknop ingedrukt totdat het LED-lampje 6 keer knippert.

Wandmontage

De AC140 kan op een vlakke ondergrond worden geplaatst of aan de muur worden bevestigd.

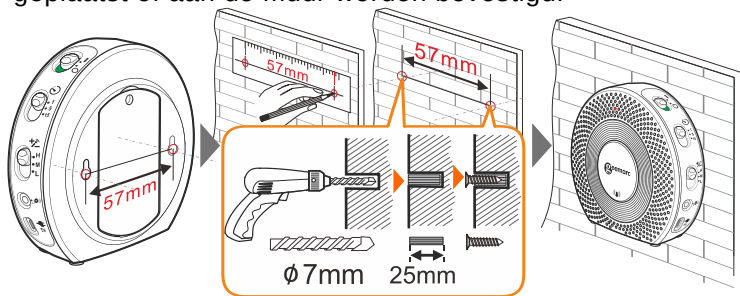

Markeer twee gaten op de muur met een potlood en een boorsjabloon.

Bevestig het apparaat aan de muur met de meegeleverde pluggen en schroeven.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc AMPLICALL™140 aanschaft, geldt de Geemarc-garantie voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons oordeel) kosteloos. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze helpdesk of bezoek onze website op www.geemarc.com. De garantie dekt geen ongelukken, nalatigheid of breuken aan onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of uit elkaar worden gehaald door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van Geemarc is. De garantie van Geemarc beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW AANKOOPBON MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIEAANSPRAAK.

VERKLARINGEN:

EU-richtlijnen

Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze AMPLICALL™140 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op **www.geemarc.com**.

RF-vermogen: < 250mW

Recyclingrichtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingesteld om ervoor te zorgen dat producten aan het einde van hun levensduur op de best mogelijke manier worden gerecycled.

Wanneer dit product aan het einde van zijn levensduur is, mag u het niet in de huisvuilbak gooien. Maak gebruik van een van de volgende verwijderingsopties:

- Verwijder de batterijen en deponeer deze in een daarvoor bestemde WEEE-container. Deponeer het product in een daarvoor bestemde WEEE-container.
- Of lever het oude product in bij de winkel. Als u een nieuw product koopt, moeten zij het oude product accepteren. Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.



Voor productondersteuning en hulp kunt u terecht op onze website www.geemarc.com

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**
telefoon **+49(0)30 209 95 789**

de lijnen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Geemarc Telecom

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
Frankrijk

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China



UGAMPLICALL140_NI_v1.0