



Model SBB500SS-v3

Sonic Boom dubbele wekker & bedschudder met 5-traps dimmer



BEDIENINGSINSTRUCTIES

BELANGRIJK – Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Zie de gebruiksaanwijzing op de achterkant.

-- Gebruik alleen de meegeleverde of aanbevolen Sonic Alert-adapter om het apparaat aan te sluiten.

Waarschuwing: Om brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Controleer voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit of de specificaties op het apparaat overeenkomen met de beschikbare stroomvoorziening in dat land, d.w.z. AC100-240V~, 50/60 Hz.

-- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

-- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.


-- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

-- Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of rekken zonder voldoende ventilatie.

-- Wanneer de net-/stroomstekker wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat, moet het ontkoppelingsapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Kenmerken

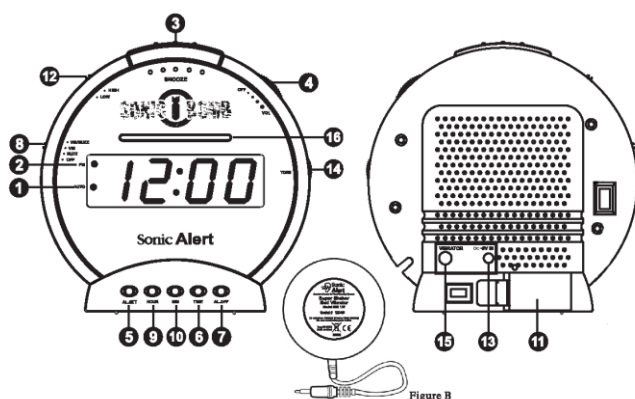

- | | |
|--|--|
| 1) Alarm 1-indicator | 10) Knop voor langzame minuten/uren |
| 2) PM-indicator | 11) Batterijcompartiment |
| 3) Snooze-knop / Snooze-tijd instellen / Dimmerregeling | 12) Alarmmodusknop (AL1, AL2, AL1+AL2) |
| 4) Volumeknop | 13) 1DC-adapteringang |
| 5) Alarm instellen / Alarmduur instellen | 14) Toonregelingwiel |
| 6) Tijd instellen-knop | 15) Vibratoruitgang |
| 7) Alarm uit-knop | 16) Knipperend lichtdisplay |
| 8) Alarmfunctieschakelaar | 17) Alarm 2-indicator |
| 9) Knop voor snelle minuten/uren / 12- of 24-uurskeuzeschakelaar | |

Testmodus:

1) Houd de knoppen Snooze en Time 3 seconden ingedrukt om de testmodus te activeren. Op het display verschijnt "7ES7" om aan te geven dat het apparaat zich in de testmodus bevindt.

2) Als er binnen 1 minuut geen knop wordt ingedrukt, wordt de testmodus verlaten en keert het apparaat terug naar de tijdmodus.

3) Als u binnen 1 minuut op een willekeurige knop drukt (behalve de knoppen Snooze en Time, die geen effect hebben), wordt de testmodus onmiddellijk verlaten.

4) In de testmodus kunt u door de functieschakelaar te verschuiven de verschillende functies van de klok bekijken:

- a) Als de functieschakelaar op **OFF** staat, klinkt er een continu "Vee"-geluid om aan te geven dat de klok in de testmodus staat.
 - b) Als de functieschakelaar op **BUZZ** staat, hoort u het zoemgeluid.
 - c) Als de functieschakelaar op **VIB** staat, hoort u de trilfunctie.
 - d) Als de functieschakelaar op **VIB & BUZZ** staat, hoort u het zoemgeluid en voelt u de trilfunctie.
- 5) Nadat u klaar bent met de testmodus, drukt u op een willekeurige knop (behalve de snooze- en tijdknoppen, die geen effect hebben) om de testmodus onmiddellijk te verlaten.

De juiste tijd instellen –

- 1) Houd de knop "**TIME**" (6) ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop '**FAST**' (9) of de knop "**SLOW**" (10) om de klokweergave vooruit te zetten totdat u de gewenste tijd hebt bereikt.
- 2) **Het verlichte puntje (2)** in de linkerbovenhoek van de klokweergave geeft aan dat het PM is. Voor AM-tijd licht dit puntje niet op.

De alarmtijd instellen –

Alarm 1 instellen

- 1) Schuif de "**ALARM MODUS SCHAKELAAR**" (12) naar de AL1-positie, de alarmindicator "**AL1**" (1) gaat branden.
- 2) Houd de knop "**ALARM SET**" (5) ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop '**FAST**' (9) of de knop "**SLOW**" (10) om de klokweergave te verplaatsen totdat u de gewenste alarminstelling hebt bereikt.
- 3) Controleer of de alarmtijd correct is ingesteld voor **AM of PM (2)**.

Alarm 2 instellen

- 4) Zodra alarm AL1 is ingesteld, schuift u de "**ALARM MODUS SCHAKELAAR**" (12) naar de AL2-positie. De alarmindicator "**AL2**" (17) gaat branden.
- 5) Houd de knop "**ALARM SET**" (5) ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop '**FAST**' (9) of de knop "**SLOW**" (10) om de klokweergave te verplaatsen totdat u de gewenste alarminstelling hebt bereikt.

Selecteren van 12- of 24-uursformaat

– De klok is ingesteld op **12 uur voor het Verenigd Koninkrijk en op 24 uur voor Europa**.

Houd de **Fast-knop (9)** 6 seconden ingedrukt om de modus voor het selecteren van het uur te openen. Laat de **Fast-knop (9)** los wanneer het display "12 H" of "24 H" weergeeft. Druk op de uurknop om te schakelen tussen 12 of 24 uur. Als er binnen 4 seconden geen keuze wordt gemaakt, wordt het laatst weergegeven uurformaat gekozen en keert het display terug naar de normale tijdmodus.

Alarm –

Alarmen inschakelen:

- 1) Om alarm 1 in te schakelen, schuift u de "**ALARM MODUS SCHAKELAAR**" (12) naar de AL1-positie. De alarmindicator "**AL1**" (1) gaat branden.
- 2) Om alarm 2 in te schakelen, schuift u de "**ALARM MODUS SCHAKELAAR**" (12) naar de AL2-stand. De alarmindicator "**AL2**" (17) gaat branden.
- 3) Om beide alarmen in te schakelen, schuift u de "**ALARM MODUS SCHAKELAAR**" (12) naar de AL2-stand. De alarmindicatoren '**AL1**' (1) en "**AL2**" (17) gaan branden.

De wekmodus selecteren

Om de wekmodus te selecteren, schuift u de "**Alarm Function Switch**" (8) naar de gewenste stand:

- a) "BUZZ" voor geluid
- b) 'VIB' voor bedschudder
- c) "VIB/ BUZZ" voor zowel geluid als bedschudder

OPMERKING: zodra de wekmodus is gekozen, geldt deze voor beide alarmen.

Alarmpatronen –

Wanneer het alarm wordt geactiveerd, loopt het alarmpatroon van de zoemer/knipperende display niet synchroon met de vibrator. Dit betekent dat wanneer de zoemer/knipperende display AAN staat, de vibrator UIT staat en wanneer de zoemer/knipperende display UIT staat, de vibrator AAN staat.

ALARM 1 - Wanneer alarm 1 wordt geactiveerd, klinkt er 3 keer een pieptoon van de zoemer, gevolgd door de vibrator. Dit patroon wordt herhaald totdat het alarm wordt gestopt.

ALARM 2 - Wanneer alarm 2 wordt geactiveerd, klinkt er 4 keer een pieptoon van de zoemer, gevolgd door de vibrator. Dit patroon wordt herhaald totdat het alarm wordt gestopt.

De duur van het alarm aanpassen

De standaard instelling voor de alarmduur is 30 minuten; u kunt de alarmduur naar wens aanpassen tussen 1 minuut en 59 minuten. Om de alarmduur aan te passen:

- Houd de **AL. SET-knop (5)** zes seconden ingedrukt. Op het klokdisplay wordt de standaard alarmduur weergegeven als '30'. Laat de AL-knop los.
- Druk op de knop '**SLOW**' (10) om de alarmduur aan te passen naar de gewenste instelling, van 1 minuut tot 59 minuten.
- Wanneer het display de gewenste alarmduur weergeeft, keert het na 3 seconden terug naar de normale klokmodus. De nieuwe instelling voor de alarmduur wordt de nieuwe standaardinstelling en blijft in het geheugen opgeslagen totdat u deze opnieuw wijzigt.

Snooze-functie –

1. Wanneer het alarm 's ochtends afgaat, kunt u op de **SNOOZE-knop (3)** drukken om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Het alarm wordt dan gedurende 9 minuten of gedurende de vooraf ingestelde tijd van 1 tot 30 minuten uitgeschakeld en gaat daarna weer af. De snooze-functie kan oneindig vaak worden herhaald totdat het alarm wordt uitgeschakeld.
2. De SNOOZE-functie van Alarm 1 en Alarm 2 is onafhankelijk van elkaar.

De sluimertijd aanpassen

De standaard sluimertijd is ingesteld op 9 minuten, maar u kunt de sluimertijd naar wens aanpassen tussen 1 minuut en 30 minuten. Om de sluimertijd aan te passen:

- Houd de **SNOOZE-knop (3)** vier seconden ingedrukt. Op het klokdisplay wordt de standaard sluimertijd '9' weergegeven. Laat de sluimerknop los.
- Druk op de knop '**SLOW**' (10) om de sluimertijd aan te passen naar de gewenste instelling, van 1 minuut tot 30 minuten.
- Wanneer het display de gewenste sluimertijd weergeeft, keert het na 3 seconden terug naar de normale klokmodus. De nieuwe sluimertijdingstelling wordt de nieuwe standaardinstelling en blijft in het geheugen opgeslagen totdat u deze opnieuw wijzigt.

Het alarm uitschakelen –

Het alarm kan tijdelijk voor die dag worden uitgeschakeld of permanent worden uitgeschakeld.

- 1) Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop "**ALARM OFF**" (7) om het alarm voor die dag uit te schakelen. Het alarm gaat de volgende dag op hetzelfde tijdstip weer af, als de alarminstellingen niet zijn gewijzigd.
- 2) Om het alarm permanent uit te schakelen, schuift u de "**Alarm Function Switch**" (8) naar beneden naar de OFF-stand. Het alarm gaat pas af als de "**Alarm Function Switch**" (8) in de stand "VIB/BUZZ", 'VIB' of "BUZZ" staat.

OPMERKING: De Alarm Off-functie van Alarm 1 en Alarm 2 is onafhankelijk van elkaar.

Dimmerbediening

Er is een helderheidsregeling met 5 niveaus voor het LED-display. Druk eenmaal op de SNOOZE-knop om de helderheid van het display te wijzigen. De helderheid zal cyclisch veranderen van 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (van helder naar donker en vervolgens van donker naar helder).

***OPMERKING*:** De dimmerfunctie werkt niet wanneer de klok in de sluimerstand staat.

Volume

Om het volume aan te passen, draait u aan het **VOLUME-wieltje (4)** rechtsonder op de klok.

Toonregeling –

Om de TOON aan te passen, draait u aan het **TOON-wiel (14)** in de rechterbovenhoek van de klok.

Bedschudder / vibrator –

- 1) Bevestig de stekker van de bedschudder aan de achterkant van de klok bij "**VIBRATOR INPUT**" (15).
- 2) Om de vibrator in te schakelen, schuift u de "**Alarm Function Switch**" (8) naar de stand "**VIB/BUZZ**" of "VIB".
- 3) Plaats de vibrator tussen het matras en de boxspring.

Batterijback-up –

Om de batterijback-up te gebruiken, kunt u een 9-volt alkalinebatterij plaatsen aan de achterkant van de klok, onder het **batterijcompartimentdeksel** (11). De batterij moet apart worden aangeschaft.

Let op: het LED-display is niet zichtbaar tijdens een stroomstoring, maar de klok blijft lopen en geeft de juiste tijd weer totdat de stroom weer terug is. Tijdens een stroomstoring kan de alkalinebatterij de klok-IC maximaal 30 dagen laten werken. **(Tijdens een stroomstoring geeft het LED-display de tijd niet weer.)**

OPMERKING: Voor het beste resultaat wordt aanbevolen om de batterij om de 6 maanden te vervangen. Als de klok een tijdje niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de batterij te verwijderen om schade aan de klok door lekkage van de batterij te voorkomen.

DC 9V voedingingang–

Sluit de "**DC POWER INPUT**" (13) aan op de achterkant van DC9V IN naast "**VIBRATOR INPUT**" (15); dit is de kleinste van de twee ingangen.

OPMERKING: BELANGRIJK: verwar de "**DC POWER INPUT**" (13) niet met de "**VIBRATOR INPUT**" (15).

ALGEMENE GEGEVENS

Fabrikant: D202


Model: GQ07-090065-DG

Ingang: AC100-240V~, 50/60Hz

Uitgang: DC9V — — — , 0.65A/5.85W

Gemiddeld rendement in actieve modus: 78%

Uitvoer vermogen USB oplaadpoort: 500 mA.

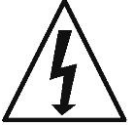 De bliksemschicht en de pijlpunt in de driehoek waarschuwen u voor gevaarlijke voltages in het product.	WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN MAG DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET VAN HET PRODUCT VERWIJDERD WORDEN. ER ZITTEN GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DE GEBRUIKER KAN BEDIENEN. RICHT U ZICH VOOR SERVICE TOT UW SONIC DEALER.	 Het uitroepteken in de driehoek waarschuwen u voor belangrijke instructies bij het product.
--	--	--

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET BLOOTGESTELD WORDEN AAN REGEN OF VOCHT.

Normaal functioneren kan verstoord worden door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, kan normaal functioneren hervat worden door de verbinding met de voedingsadapter te verbreken en weer te verbinden. Als het functioneren niet hervat wordt, probeer dan het apparaat naar een andere plaats te verplaatsen.

- Aandacht moet besteed worden aan de milieuaspecten van de batterijverwijdering.
-  geeft de aparte inzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

SONIC ALERT'S 2-JARIGE BEPERKTE GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Sonic Alert SBB500 product heeft gekocht, garandeert Sonic Alert het voor twee (2) jaar. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Dit product wordt gedekt door de wettelijke garantie van overeenkomstigheid zoals door de van toepassing zijnde wet is bepaald.

Belangrijk: uw aankoopbewijs is onderdeel van de garantie en moet bewaard worden en getoond in het geval van een garantieclaim.

Geemarc Telecom SA

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, FRANKRIJK

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het apparaat ook in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren. Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

CE verklaring:

Sonic Alert verklaart hierbij dat dit SBB500 product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van 2014/30/EU van de Elektromagnetische Comptabiliteit (EMC) en, indien van toepassing, 2014/35/EU van de Laag Voltage Richtlijn (LVR).

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Gedistribueerd door :



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com

E-mail: Help@geemarc.com

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe
FRANKRIJK

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China

Fabrikant: Sonic Alert 850 Stephenson Hwy, Suite 323, Troy MI