

geemarc™ AMPLICALL™ 100

Hear the Difference

Multialarmmodtager med dørklokke

Dansk



!!! Se vores hjemmeside: www.geemarc.com for den nyeste brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer !!!



PAKKENS INDHOLD

Pakken indeholder følgende dele:

1 brugervejledning
1 AMPLICALL™100 (AC100) base
1 AMPLICALL™101 (AC101) sender

1 strømadapter
5 skruer og 5 rawlplugs
1 vægbeslag og 1 holder til halsrem.

BESKRIVELSE

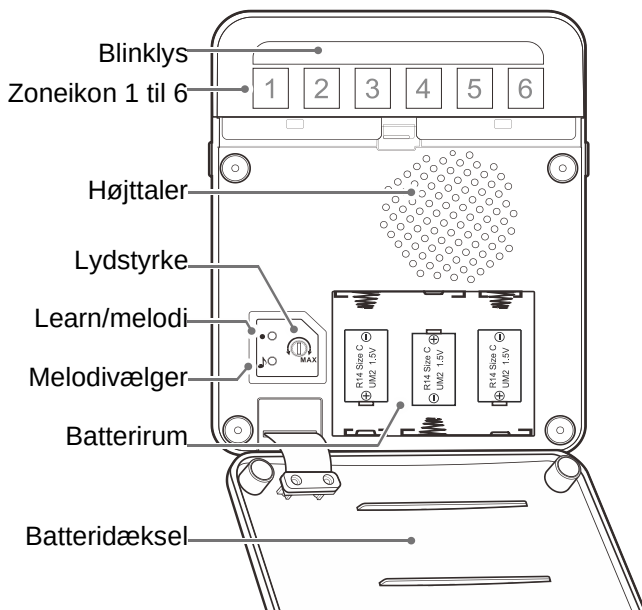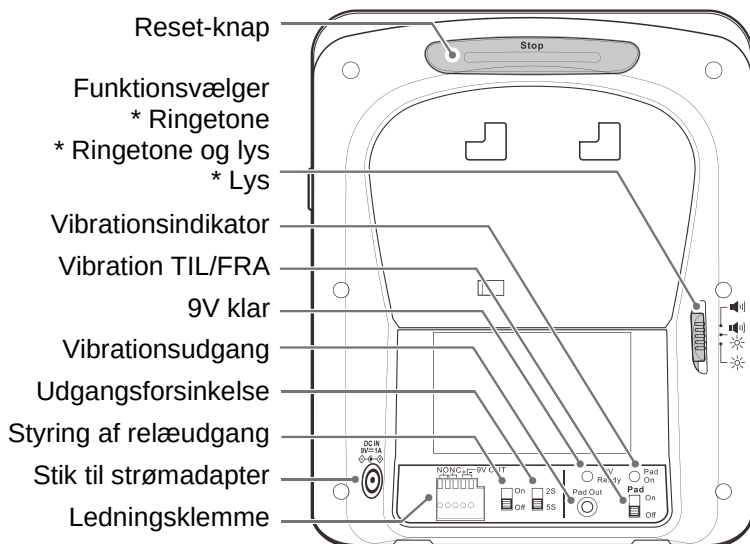


INSTALLATION

Batterier i basen (bruges ved strømsvigt)

1. Træk batteridækslet af.
2. Isæt tre 1,5 V LR14-alkalibatterier (medfølger ikke) (C) med korrekt polaritet (+/-).
3. Luk batteridækslet.
4. Sæt strømkablet i stikket på siden af AMPLICALL100 (A) og adapteren i stikkontakten (B).

9V klar: Lyser, når 9V-adapteren er korrekt tilsluttet.

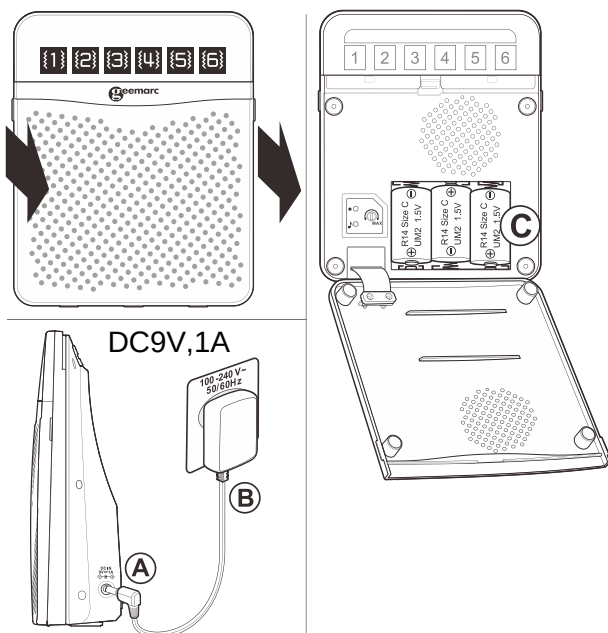

LAVT BATTERINIVEAU PÅ AC100

Hvis LED-lyset ved et zoneikon blinker, betyder det, at batteriniveauet er for lavt i den tilhørende enhed (AC101, AC110 eller AC140). Du skal udskifte batteriet så hurtigt som muligt.

Hvis blinklyset på din AMPLICALL100 blinker hvert 15. sekund, betyder det, at batteriniveauet i AMPLICALL100 er for lavt, eller at der ikke er isat batterier. Afbryd strømmen, og isæt nye batterier.

AMPLICALL™101

Montér dørløkketrykket på vægbeslaget eller holderen til halsremmen

1. Drej det valgte beslag (Fig. 1 for vægbeslaget eller Fig. 2 for holderen til halsremmen) 90 grader.
2. Drej monteringsbeslaget, indtil delen låser fast.


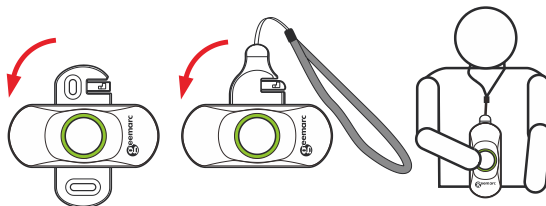


Fig 1 eller Fig 2



Batteri i senderen

1. Lås låsearmen op med fingeren (fig. 1).
2. Drej beslaget 90 grader (fig. 2).
3. Tag beslaget af enheden (fig. 3).
4. Drej batteridækslet med en mønt (fig. 4).
5. Isæt et CR2032-batteri med + opad (fig. 5).
6. Luk batteridækslet med en mønt (fig. 6).
7. Sæt beslaget på igen i 90 grader (fig. 7).
8. Drej monteringsbeslaget, indtil delen låser fast.


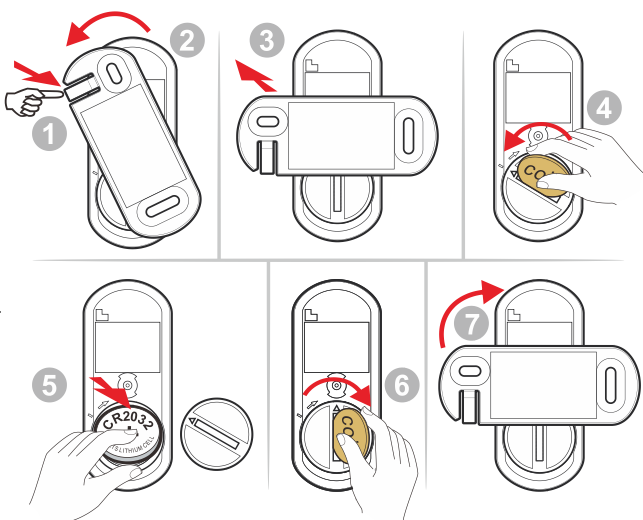


VÆGMONTERING

Du kan montere din AMPLICALL™100 på en væg.
Følg anvisningerne nedenfor.

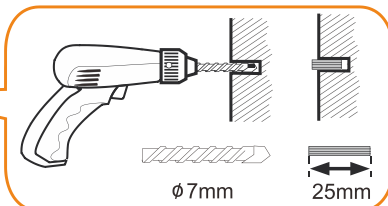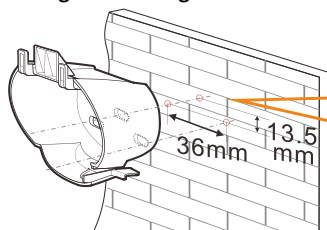

1. Hold vægbeslaget op mod væggen, og markér beslagets tre huller på væggen.
2. Bor to huller vandret med 36 mm afstand, og bor det tredje hul midt mellem de to huller, 13,5 mm over den tænkte linje mellem de to første huller.
3. Sæt tre rawlplugs i de tre huller.

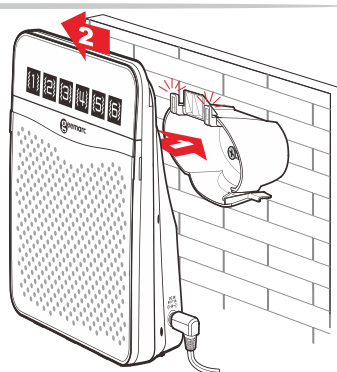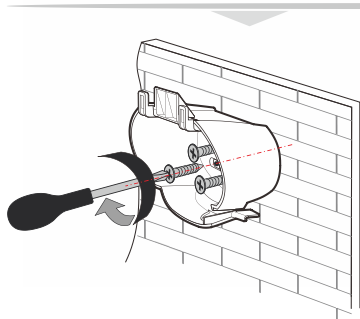


4. Skru tre skruer i rawlpluggene, hæng basen på beslaget, og skub den til venstre, så den låser.

Parring af en ny enhed AMPLICALL™101/110 eller 140 med AMPLICALL™100

Bemærk: Når du modtager din AMPLICALL™100 sammen med AMPLICALL™101-dørklokken, er enhederne allerede parret. Du behøver derfor ikke at følge nedenstående trin.

Zonevælger Learning-knap

Melodivælger

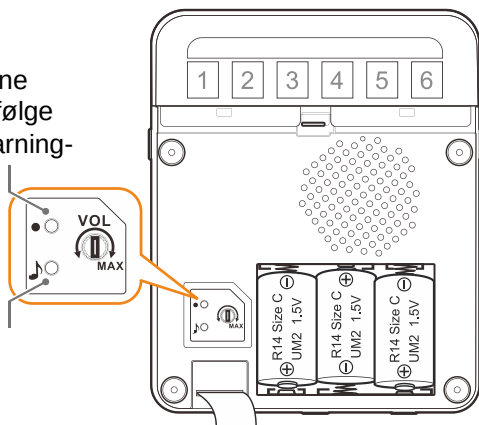

Sådan parrer du en ny enhed:

Trin 1: Aktivér parringstilstand på AC100. Tryk på **LEARNING**-knappen (●), og hold den inde i 3 sekunder. LED'en ved zoneikon nr. 1 blinker.

Trin 2: Tryk på **LEARNING**-knappen (●) igen for at gå til det zoneikon, du vil parre med.

Tryk på **melodivælgeren** (♪) for at bladre gennem melodierne. Når du hører en melodi, du kan lide, må du ikke trykke på nogen knap, mens melodien spiller.

Trin 3: Når zoneikon og melodi er valgt, skal du trykke én gang på knappen på enheden (AC101, AC110 eller AC140) for at parre den. Hvis parringen lykkes, giver AC100 to korte toner.

Tryk på **LEARNING**-knappen (●) for at afslutte parringstilstanden. Systemet er nu klar til brug.

*For at stoppe ringetonen, mens AMPLICALL™100 alarmerer, skal du trykke på **reset**-knappen øverst på bagsiden.*

Sletning af en enhed fra AMPLICALL™100-hukommelsen


- Hold knappen '**Learning**' inde i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand.
- Tryk på knappen '**Learning**' for at vælge den zone, du vil slette.
- Tryk på knapperne '**Learning**' og '**Melody**' samtidig, og hold dem inde i 3 sekunder.
- AMPLICALL™100 giver en tone, når enheden i zonen er slettet.
- Tryk på **Reset**-knappen på bagsiden for at afslutte.

Ændring af melodi/tone for det ønskede zoneikon

- Hold knappen '**Learning**' inde i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand.
- Tryk på knappen '**Learning**' for at vælge det zoneikon, du vil ændre.
- Tryk på knappen '**Melody**' for at vælge ny melodi/tone, og tryk derefter på **Learning**. En tone bekræfter ændringen.
- Tryk på **Reset**-knappen på bagsiden for at afslutte.

Udskiftning af zoneikonpladen


Når du har parret din enhed (AC101, AC110 eller AC140), skal du huske at udskifte zoneikonbilledet med det, der følger med enheden (AC101, AC110 eller AC140).

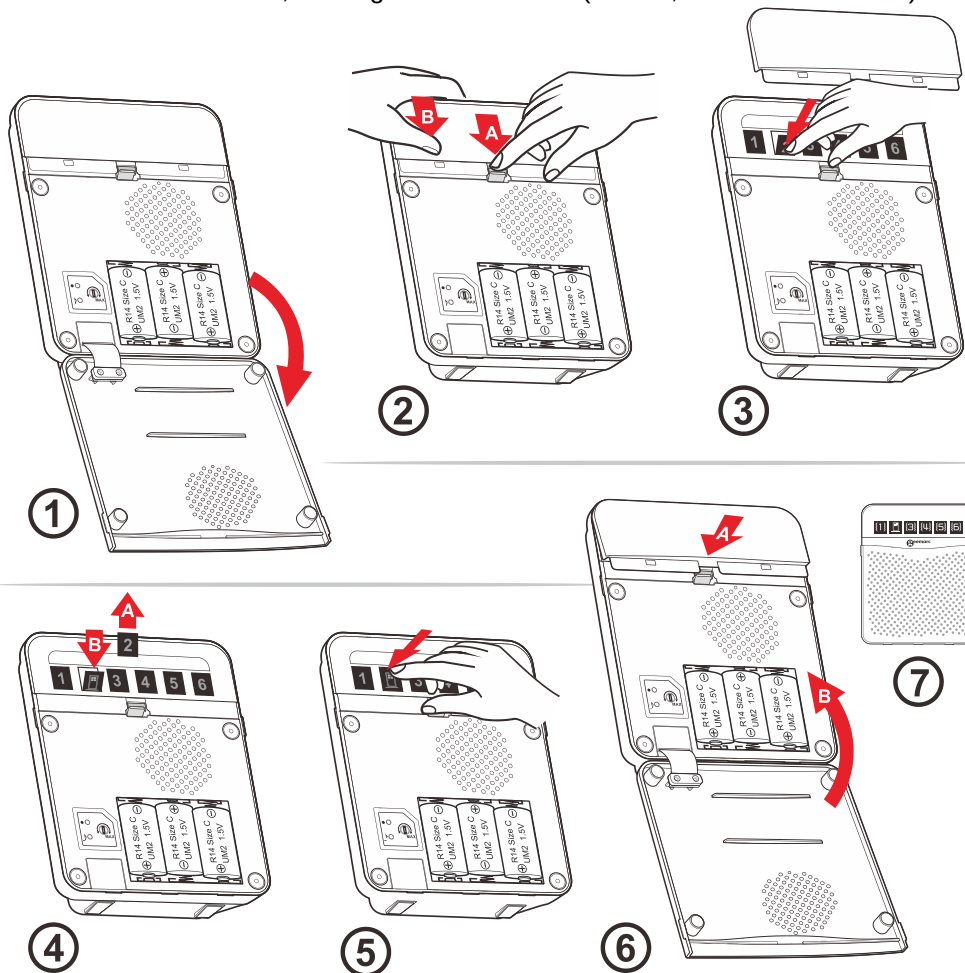

1. Åbn batteridækslet (fig. ①).
2. Skub det gennemsigtige dæksel over blinklyset nedad, og løft det af (fig. ②).
3. Tryk på den nederste del af zoneikonbilledet for at fjerne det (fig. ③).
4. Sæt den nye ikonplade, der fulgte med din enhed (AC101, AC110 eller AC140), i holderen (fig. ④).
5. Tryk på den øverste del af ikonpladen for at fastgøre den (fig. ⑤).
6. Sæt det gennemsigtige dæksel på (sæt først toppen i, og klik derefter bunden af den gennemsigtige plast på plads; du bør høre et klik) (fig. ⑥).
7. Sæt batteridækslet på igen.

Vibrator (ekstraudstyr)

Bemærk: Hvis du vil bruge vibratoren, anbefales det at tilslutte strømadapteren (9V $\approx$ 1A, AC/DC) ud over batterierne. Vibratoren vibrerer, hver gang basen modtager en alarm.

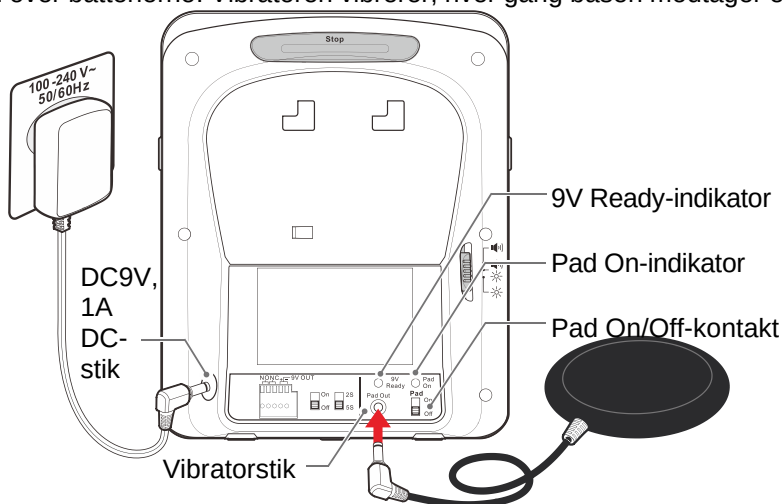

Pad On/Off : Skub **PAD**-kontakten til **ON** eller **OFF** for at slå vibrationsfunktionen til eller fra.

Pad On-indikator : Når vibratorens On/Off-kontakt står på **On**, lyser LED-indikatoren for at vise, at vibrationsfunktionen er aktiveret.

Pad OUT : Sæt vibratoren i dette stik.


Bemærk: • Vibratoren kan bruges til alle zoneikoner.

- Vibratoren kan købes separat (CLA2).

TILSLUTNING OG INDSTILLING af døråbnerfunktionen

Du kan styre din døråbner automatisk, hvis modtageren for zoneikon 5 eller 6 modtager et udløssersignal. Se brugervejledningen til din døråbner for at forbinde den med AMPLICALL™100.

Tryk armen ned med en lille skruetrækker, og før ledningen ind i hullet. Slip derefter armen for at holde ledningen fast.

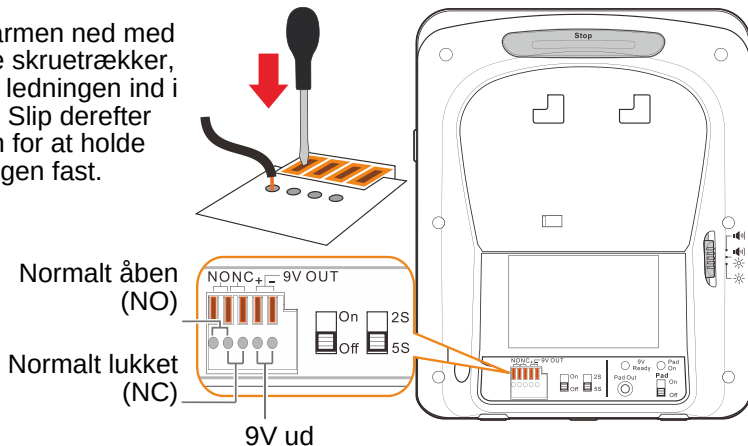

Kontakt til styring af relæudgang

Skub on/off-kontakten til positionen 'On': Relæet aktiveres, når zoneikon 5 eller 6 modtager et udlørsersignal.

Skub kontakten til positionen 'Off': Relæet aktiveres ikke, når zoneikon 5 eller 6 modtager et udlørsersignal.

Varighed af relæudgangens aktivering

Skub kontakten til positionen '2': Relæet aktiveres i 2 sekunder, når zoneikon 5 eller 6 modtager et udlørsersignal.

Skub kontakten til positionen '5': Relæet aktiveres i 5 sekunder, når zoneikon 5 eller 6 modtager et udlørsersignal.

GARANTI

Fra den dag, du køber din Geemarc AMPLICALL™100, giver Geemarc to års garanti. I denne periode er alle reparationer eller udskiftninger (efter vores skøn) gratis. Hvis du oplever et problem, kan du kontakte vores hotline eller besøge vores hjemmeside www.geemarc.com. Garantien dækker ikke uheld, forsømmelse eller brud på dele. Produktet må ikke ændres eller skilles ad af andre end en autoriseret Geemarc-repræsentant. Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine lovmæssige rettigheder.

VIGTIGT: DIN KVITTERING ER EN DEL AF DIN GARANTI OG SKAL GEMMES OG FREMVISES VED ET GARANTIKRAV.

ERKLÆRINGER:

UKCA-direktiver

Geemarc Telecom SA erklærer hermed, at denne AMPLICALL100 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

UKCA-overensstemmelseserklæringen kan ses på www.geemarc.com

RF-effekt: < 250 mW

Genanvendelsesdirektiver

WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) er indført, for at produkter ved afslutningen af deres levetid genanvendes på den bedst mulige måde.

Når produktet ikke længere skal bruges, må det ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Benyt en af følgende muligheder for bortskaffelse:

- Tag batterierne ud, og aflever dem i en egnet WEEE-container. Aflever produktet i en egnet WEEE-container.
- Eller aflever det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber et nyt produkt, bør forhandleren tage imod det gamle.

Ved at følge disse anvisninger bidrager du til at beskytte menneskers sundhed og miljøet.



Produktsupport og hjælp finder du på vores hjemmeside www.geemarc.com

E-mail: help@geemarc.com telefon 01707 387602

Åbent kl. 9.00-16.00 mandag til fredag

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe, France

Dette produkt er fremstillet i Kina for Geemarc Telecom

QUGAMPLICALL100_DK_A5_V1.1