


## HURTIG BRUGERMANUAL

Se venligst vores webside: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) for en opdateret brugerguide, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer som du bør kende til!


Oplysninger om vekselstrømsadapter: Hovedenhed og medaljon: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

Genopladeligt batteri: Model: NI-MH AAA500x2. 2,4V, 500mAh. Corun.


### Bund

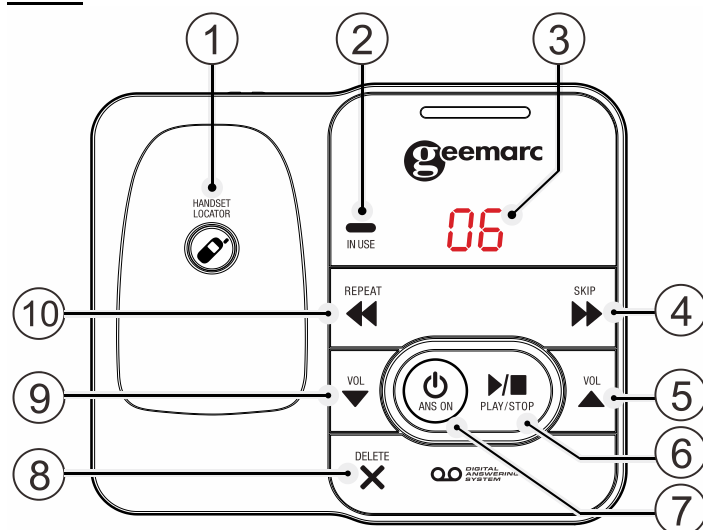

### Håndsat

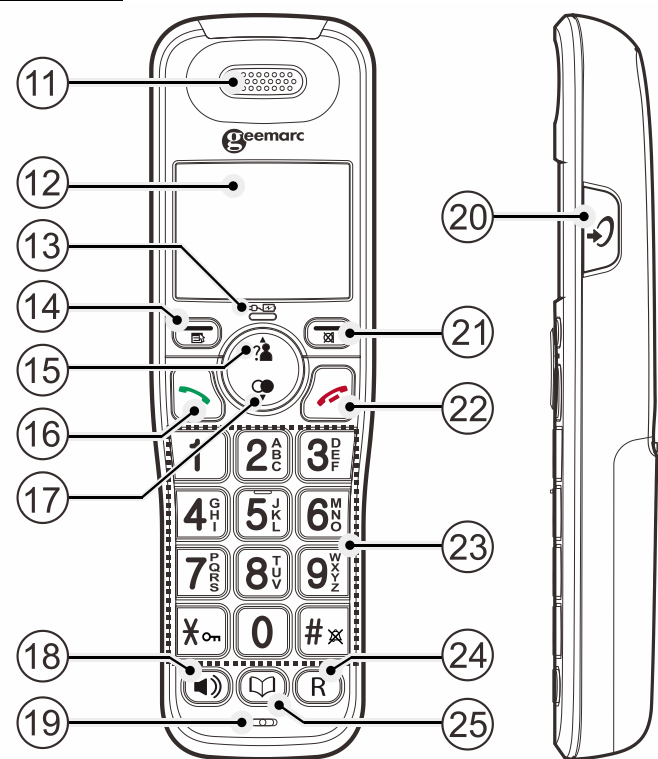

### Forbindelse bund

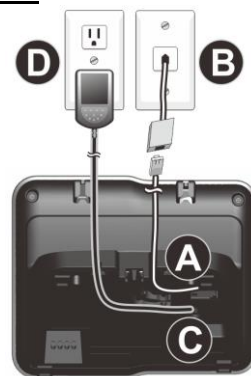

### Tilslutning ekstra håndsat (Valgfri)



### PAKKEN INDEHOLDER

1 Telefonbund, 1 trådløst håndsat, 1 strømadapter, 1 telefonledning, 1 NiMH batteripakke, 1 brugermanual.

### INSTALLERING

#### Tilslutning af telefonen

Tilslut stikket til telefonen (A) og til telefonstikket i væggen (B). Forbind stikket til strømadapteren til bunden (og DC- laderen) (C) og sæt så stikket til strømadapteren i kontakten (D).

**Notér:** Brug kun strømadapteren der fulgte med telefonen.

#### Tilslutning af batterier

Sæt batteri-forbinderen sikkert fast i holderen i håndsettets batteridél.

Indsæt det medfølgende batteri som vist.



Sæt låget fladt imod batteridelen og skub det opad indtil det klikker på plads.

#### Ladning af batterierne

Lad batterierne i mindst 16 timer første gang de lades.

### OVERBLIK

#### Bund

##### 1- /HÅNDSÆTLOKATOR

Når telefonen ikke er i brug, trykker man for at finde alle håndsat.

##### 2- I BRUG

ON når håndsat er i brug eller når der tages en indkommende samtale.

ON når et håndsat registreres.

Blinker når der er en indkommende samtale eller når håndsat afregistreres.

Blinker når en anden telefon er i brug samtidigt.

##### 3- MEDDELELSER

Blinker når der er en indkommende samtale.

4- /SKIP: Tryk for at hoppe en besked.

5- VOL ( )

Under afspilning af meddelelser, trykker man her for at øge lyden. Når telefonen ikke er i brug, trykker man for at øge basen ringelyd.

##### 6- /PLAY/STOP:

Tryk for at starte eller stoppe afspilning af beskeder.

##### 7- /ANS ON

Tryk for at tænde eller slukke for det indbyggede svarensystem

##### 8- /DELETE

Tryk for at slette beskeden der afspilles.

Hold knappen nede i længere tid for at slette alle gamle beskeder når telefonen ikke er i brug.

##### 9- VOL ( )

Under afspilning af beskeder trykker man for at skrue ned for lyden. Når telefonen ikke er i brug, trykker man for at skrue ned for ringevolumen på basen.

##### 10- /REPEAT

Tryk for at gentage en besked.

Tryk to gange for at afspille den forrige besked.

### Håndsat

#### 11- HØJTALER

#### 12. LCD DISPLAY

#### 13. LADNINGSLYS ( )

Konstant på når håndsatet lader i laderen.

#### 14. MENU/OK ( )

Når den er inaktiv: Tryk for at gå til hovedmenuen.

I undermenuen: Tryk for at bekræfte valget.

Under en samtale: Tryk for komme til Intercom /Telefonbog/Ring tilbage-liste /Opkaldsliste.

#### 15. OP/RINGELISTE ( )

Når telefonen er inaktiv: Tryk for at komme ind i kaldelisten.

I menuen: Tryk for at gå op gennem menuvalgene.

I telefonbogens lister: Tryk for at scrolle op ad listen.

I redigeringsmenuen: Tryk for at flytte markøren et tegn til venstre.

Under samtale: Tryk for at skrue op for lyden.

Under ringning: Tryk for at skrue op for ringelyden.

#### 16. SAMTALE AKTIV ( )

I inaktivt stadie eller inden opringning: tryk for at foretage et opkald i høretelefonen.

I telefonbogen /opkaldsliste: Tryk for at gøre en opringning i telefonrøret.

Når den ringer: Tryk for at tage en samtale med telefonrøret.

#### 17. NED/RING TILBAGE-LISTE ( )

Når telefonen er inaktiv: Tryk for at komme til ring tilbage-listen.

I menuen: Tryk for at scrolle ned gennem menuen.

I telefonlisten/ring-tilbage-listen/opkaldsliste: Tryk for at scrolle ned ad listen.

I redigeringsmenu: Tryk for at flytte markøren en tegn til højre.

Under en samtale: Tryk for at skrue ned for lyden.

Når den ringer: Tryk for at skrue ned for ringelyden.

#### 18. HØJTALER ( )

I inaktivt stadie/inden opringning: Tryk for at foretage en opringning med højtaler. Tryk igen for at skifte til høretelefon.

I telefonlisten/ring tilbage-listen/opkaldsliste: Tryk for at gøre en opringning til den ønskede kontakt med højtaler.

Når den ringer: Tryk for at svare med højtaler.

Tryk igen for at skifte til høretelefon.

#### 19. MIKROFON

#### 20. VOLUME BOOST ( )

Under samtale: Tryk for aktivere/deaktivere funktionen VOLUME BOOST.

#### 21. AFBRYD/MUTE ( )

I hovedmenuen: Tryk for at gå tilbage til den inaktive skærm.

I indstillingen undermenuen: Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.

I indstillingen undermenu: Tryk og hold nede for at vende tilbage til den inaktive skærm.

I status redigering/inden opringning: Tryk for at slette et bogstav/tal.

I status redigering/inden opringning: Tryk og hold nede for at slette alle bogstaver/tal.

Under en samtale: Tryk for slukke/tænde for mikrofonen.

Når den ringer: Tryk for tyste håndsatet når det ringer.

Ved inaktivt stativ: Tryk for at koble med et andet håndsat.

#### 22. AFSLUTTE SAMTALE ( )

Under en samtale: Tryk for at afslutte en samtale og gå tilbage til inaktiv status.

I menuen/redigering: Tryk for at vende tilbage til den forrige menu.

I menu/redigering: Tryk og hold nede for at vende tilbage til inaktiv skærm.

I inaktiv status: Tryk og hold nede for at slukke for håndsatet.

Tryk og hold nede for at tænde den når den er slukket.

#### 23. ALFANUMERISK TASTATUR, STJERNE ( ), HASH ( )

Inden opkald eller redigeringsmenuen: Tryk for at indtaste et tal / bogstav / / .

knappen inaktiv tilstand: Tryk og hold nede for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.

knappen inaktiv tilstand: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke røret.

knappen inaktiv tilstand/ inden opkald /ved redigering af nummer: Tryk og hold nede for at indsætte en pause.

#### 24. R

Under en samtale: Tryk for at tage en ny samtale hvis du har tilmeldt dig tjenesten Ventende samtaler fra din leverandør.

#### 25. TELEFONBOG ( )

I inaktiv status: Tryk for at komme ind i telefonbogen.

#### Telefonens indstillinger er altid sat på samme måde:

Tryk på **Menu/OK** ( ) knappen for at åbne hovedmenuen. Brug derefter pilene for at vælge og bekræft det ved at trykke på knappen **Menu/OK** ( ).

Den forudindstillede PIN-kode fra fabrikken er **0000**

#### Eksempel:

##### Indstil sproget på basen

Tryk **MENU / OK** ( ) og vælg sprog, tryk på **MENU / OK** ( ), vælg derefter ønsket sprog og tryk på **MENU / OK** ( ) for at bekræfte.

##### Indstil sprog på håndsatet

Tryk på **MENU / OK** ( ) og vælg HS settings, tryk på **MENU / OK** ( ) og vælg language, tryk på **MENU / OK** ( ), vælg derefter desired language og tryk så **MENU / OK** ( ) for at bekræfte.

### MENUINDSTILLING

#### Håndsat

#### TELEFONBOG

SE LISTE

når man går ind: ADD VIEW EDIT DELETE

DELETE ALL PB STATUS FASTDIAL

## RINGELISTE

► SE LISTE

når man går ind: ► ADD TO PB ► DELETE ► DELETE ALL ► DETAILS ► CATEGORY

## BS-INDSTILLINGER

► BS RINGER ► RING VOLUME ► DELETE HS ► DIAL MODE ► FLASH TIME ► CHANGE PIN

## HS-INDSTILLINGER

► RING SETUP ► TONE SETUP ► SELECT BASE ► LANGUAGE ► RENAME HS ► HS DISPLAY ► AUTO ANSWER

## DIRECT MEM

► M1-M2-M3-M4

## DATO & TID

► DATE FORMAT ► TIME FORMAT ► SET TIME ► SET DATE

## ALARM

► ON ► OFF

## REGISTRERING

► BASE 1, 2, 3 or 4

## STANDARD

► PIN? 0000 som standard

## TELEFONSVARER

► MSG PLAYBACK ► DELETE ALL ► MEMO ► TAM ON/OFF

► TAM SETTINGS (ANSWER MODE, TAM LANGUAGE, OGM SETTINGS, ANSWER DELAY, RECORD TIME, COMPRESSION, BS SCREENING, REMOTE ACC, CHANGE PIN)

## REGISTRERING AF HÅNDSÆT

**Bemærk:** Håndsættet og basen er forudindstillede.

Op til fem håndsæt kan registreres til en enkelt station. I tilfælde af omregistrering er PIN-koden **0000**.

### Registrering af et håndsæt






**På håndsættet:** Tryk på MENU/OK  og vælg ▼▲ REGISTRATION

Tryk MENU/OK  og vælg ▼▲BASE(1-4), Tryk MENU/OK  skriv PIN-koden på 4 cifre for the basens PIN.

Samtidigt på **basen:** tryk på  /HANDSET LOCATOR på basen og hold den nede for at gå ind i registreringsmenuen.


Efter en kort forsinkelse og hvis registreringen lykkes, vil der være bip, der kræfter dette. Håndsættets display vil gå tilbage til inaktiv status med det nye nummer af håndsættet vist. Basens display vil også gå tilbage til inaktiv status.

### Afregistrering

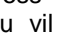**På håndsættet:** Tryk MENU/OK , vælg ▼▲BS SETTINGS, tryk MENU/OK , vælg ▼▲DELETE HS, tryk MENU/OK  enter PIN **0000**, press MENU/OK , vælg ▼▲af af de håndsæt som du vil afregistrere, tryk MENU/ OK  for at bekræfte.

## INTERCOM

### Interne samtaler



Tryk C / MUTE , Gå ind på det det ønskede håndsæt på tastaturet.

**BEMÆRK:** Hvis der kun er registreret et trådløst håndsæt til basen, er interne samtaler ikke muligt.

## Ringte til alle håndsæt



Tryk C / MUTE , Tast "9" på tastaturet.

## Viderestil en ekstern samtale

Tryk MENU/OK , vælg ▼▲INTERCOM, Tryk MENU/OK ,

Vælg det ønskede nummer af håndsæt på tastaturet. Efter forbindelse afsluttes samtalen på håndsættet.

## Konferencekald

Tryk på MENU/OK , vælg ▼▲ INTERCOM, Tryk MENU/OK ,

Indtast det ønskede nummer af håndsæt på tastaturet. Efter forbindelse trykkes og holdes ✕ nede indtil CONFERENCE vises.

**NOTE:** Når en deltager lægger på under et konferencekald, vil de andre deltagere stadig være forbundet til det eksterne opkald.

## TELEFONBOG

Din telefon kan gemme op til 50 private telefonbøger. i det trådløse håndsæt og i telefonbasen med navn og nummer. Hver indtastning i telefonbogen kan have maksimalt 20 cifre i telefonnummeret og 12 cifre for navnet. Du kan også vælge forskellige ringetoner for dine indtastede kontakter.

Indtastede kontakter gemmes alfabetisk efter navn.

### For at tilføje en ny kontakt

I inaktiv status:

Tryk MENU/OK , vælg ▼▲PHONEBOOK for at komme til listen i telefonbogen (eller den tomme liste),

Tryk MENU/OK , for at vælge ADD.

Tryk MENU/OK , for at vælge NAME skriv navnet.

Tryk MENU/OK , for at vælge NUMBER, skriv nummeret.


Tryk MENU/OK , og ▼▲ for at vælge den ønskede ringetone for din kontakt i telefonbogen.


Tryk MENU/OK , for at gemme.

## DIRECT MEM

Din AMPLIDECT295-base kan også tilkobles som ekstra håndsæt med nogle specifikke håndsæt/enheder som vores PhotoDECT295 eller EMERGENCY295 som behøver direkte gemte numre programmerede ind i basen, og disse numre ( 4 maxi ) skal tilføjes gennem det normale håndsæt.


**På håndsættet:** Tryk MENU/OK , vælg ▼▲DIRECT MEM,

Tryk MENU / OK , vælg ▼▲M1-M2-M3-M4,

Tryk MENU / OK , skriv nummeret og så OK.

## TELEFONSVARER

Din telefonbase inkluderer en telefonsvarer der modtager ubesvarede samtaler når den er på. Telefonsvareren kan gemme op til 59 beskeder indenfor den maksimale indspilningstid på ca. 15 minutter. Udover at kunne indspille indkommende beskeder kan du indspille beskeder til andre brugere af din telefon.

Tryk på /ANS ON/OFF for at TÆNDE eller SLUKKE for telefonsvareren.

## FJERNSTYRING

Hvis du er væk fra hjemmet, kan du ringe til din telefonsvarer for at tænde eller slukke for den og afspille dine beskeder på afstand ved at bruge en anden telefon.

1. Ring op fra en telefon/
2. Når telefonsvareren besvarer opkaldet og afspiller den

forindspillede meddelelse, trykker du på ✕.

3. Indtast den 4-cirrede PIN-kode for fjernadgang (forudvalgt er is **0000**).

4. Tryk på de følgende knapper for at udføre dine ønskede handlinger.

knap	Funktioner	
	<b>Når beskeden ikke afspilles</b>	<b>Mens beskeden afspilles</b>
2		Slet den nuværende besked playback
4		Afspil den nuværende besked igen fra begyndelsen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige besked.
5	Afspil beskeden	
6		Hop frem for at afspille den næste besked.
7	Sluk for telefonsvareren	
8		Stop afspilning af den nuværende besked
9	Sluk for telefonsvareren	
*	Skriv den 4-cifrede PIN-kode for fjern-adgang	



### NOTE:

Når din telefonsvarers hukommelse er fuld og status for svar er ANS & RECORD, vil status for svar automatisk ændres KUN TIL SVAR.

Den vil automatisk ændre til status ANS & RECORD efter at nogle beskeder er blevet slettet.

Du kan ikke slette nye beskeder inden de er blevet afspillet.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Grundlæggende Information	
Rækkevidde	Indenfor: 50m Udenfor :300m
Håndsæt betjeningstid	Standby tid: 100 timer Tale tid: Omkring 10 timer
RF Parameter	
Frekvens	1.88 GHz to 1.9GHz
Nb-kanaler	10
RF-kraft	< 250mW
Strømkilde	
Basen	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Lader	Input 100-240V 50/60Hz; output DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Håndsæt	2.4V; 500mAH genopladelig NiMh batteripakke

## VEDLIGEHOLD

Tør overfladen af med en blød, glat klud. Brug ingen rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

## GARANTI

Fra det øjeblik du køber din Geemarc AMPLIDECT™295, garanterer Geemarc den i en periode på to år. I denne periode er alle reparationer og udskiftninger (efter vores vurderinger) gratis. Skulle du støde på nogle problemer kan du kontakte vores kundeservice eller besøge vores webside på t [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Garantien dækker ikke ulykker, negligering eller ødelæggelse af nogle dele. Produktet må ikke modificeres eller skilles ad af nogen som ikke er en autoriseret repræsentant fra Geemarc.

Garantien fra Geemarc begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

**VIGTIGT: DIN KVITTERING ER DEL AF DIN GARANTI OG SKAL GEMMES OG FREMVISES I TILFÆLDE AF EN GARANTIREKLAMATION.**

**Bemærk venligst: Garantien gælder i Danmark.**

## ERKLÆRINGER:

### CE-direktiver

Geemarc Telecom SA erklærer hermed at denne AMPLIDECT™295 er I overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante lovbestemmelser i Radio Equipment Directive 2014/53/UE. *CE-erklæringen om konformitet kan læses på at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

**Elektrisk forbindelse:** Apparatet er designet for at kun kunne fungere fra en 230V 50Hz strømkilde. (Klassificeret som farlig spænding ifølge EN62368-1 -standard). Apparatet kommer ikke med en integreret tænd/sluk-knap. For at slukke for apparatet trækkes strømadapteren ud. Når apparatet installeres. sørg da for at stikket fungerer og er let at komme til.

**Telefonforbindelse:** Spændinger der findes på telekommunikationsnetværket er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) ifølge EN62368-1-standarden.

### Genbrugsdirektiver

Direktivet WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er blevet brugt for produktet til slut i deres levetid og er blevet genbrugt på den bedst mulige måde.

Når dette produkt er færdigt, put det venligst ikke i skraldespanden. Vi beder dig bruge en af følgende muligheden for bortskaffelse:

- Fjern batterierne og deponer dem efter passende forskrifter. Deponer produkter i overensstemmelse med passende forskrifter.

- Eller gi det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber et nyt, bør de acceptere det.

Hvis du følger disse instruktioner, sikrer du personlig helse og beskytter miljøet.



For produktsupport og hjælp besøg vores webside på visit [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

E-mail : [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com) telefon **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX, FRANKRIG



**Manufacturer:** Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.  
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Dette produkt er produceret i Kina for Geemarc Telecom

QUGAMPLIDECT295\_Danish\_A3\_V1.6