

Model SBB500SS-v3

Sonic Boom Dual Alarm Clock & Bed Shaker med 5-niveaus lysdæmper




BETJENINGSINSTRUKTIONER

- VIGTIGT:**
- Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt før brug og gem dem til fremtidig reference. Se betjeningsvejledning på bagsiden.
 - Brug kun den medfølgende eller anbefalede Sonic Alert-adapter til at tilslutte enheden.

- Advarsel:** For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. Før tilslutning til lysnettet/strømforsyning skal du sikre dig, at kravene specificeret på apparatet svarer til den tilgængelige strømforsyning i det pågældende land, dvs. AC100-240V~, 50/60 Hz.
- Ventilationen må ikke hæmmes ved at dække ventilationsåbningerne med genstande som avispapir, duge, gardiner osv.;
 - Ingen kilder med åben ild, såsom tændte stearinlys, må placeres på apparatet.
 - Det må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
 - Anbring ikke produktet i lukkede bogreoler eller stativer uden ordentlig ventilation.
 - Hvor net-/strømticket bruges som afbrydelsesenhed, skal afbrydelsesenheden forblive let at betjene.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

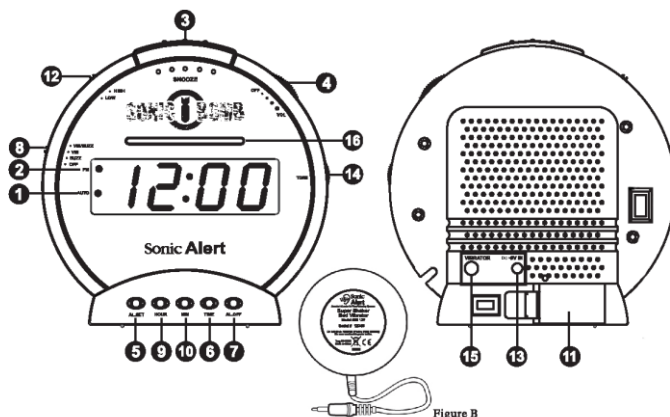

Funktioner

- | | |
|---|---|
| 1) Alarm 1-indikator | 10) Langsom min./time knap |
| 2) PM-indikator | 11) Batterirum |
| 3) snooze knap / Snooze-tidsjustering/dæmperkontrol | 12) Alarmtilstandskontakt (AL1, AL2, AL1+AL2) |
| 4) Volumen hjul | 13) DC-adapterindgang |
| 5) Alarmindstilling / Alarmvarighedsjustering | 14) Tonekontrollhjul |
| 6) Tidsindstillingsknap | 15) Vibrator udgang |
| 7) Alarm slukket knap | 16) Blinkende lys display |
| 8) Alarm funktionskontakt | 17) Alarm 2-indikator |
| 9) Fast min. / timer-knap / 12 eller 24 timers vælger | |

Test mode:

- 1) Tryk og hold Snooze- og Time-knapperne nede i 3 sekunder for at gå ind i testtilstand. Displayet vil vise "7ES7" for at angive, at det er i TEST-tilstand.
- 2) Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 1 minut, forlader den testtilstanden og vender tilbage til tidstilstanden.
- 3) Tryk på en vilkårlig knap inden for 1 minut (undtagen Snooze & Time-knapperne, som ikke har nogen effekt), det forlader testtilstanden med det samme.
- 4) Mens du er i testtilstand, vil det at skubbe funktionskontakten vise urets forskellige funktioner:

- a) Funktionskontakt på OFF, den vil have en kontinuerlig "Vee"-lyd for at angive, at den er i testtilstand.
 - b) Funktionskontakt ved BUZZ, den vil demonstrere summerlyden.
 - c) Funktionskontakt ved VIB, den vil demonstrere vibratoren.
 - d) Funktionskontakt ved VIB & BUZZ, det vil demonstrere summerlyden og vibratoren.
- 5) Når du er færdig med testtilstanden, skal du trykke på en vilkårlig knap (undtagen Snooze & Time-knapperne, som ikke har nogen effekt), det vil forlade testtilstanden med det samme.

Indstilling af det rigtige tidspunkt

- 1) Tryk og hold "TIME"-knappen (6) og tryk samtidig på "FAST"-knappen (9) eller "LANGSOM"-knappen (10) for at fremføre urvisningen, indtil du har ønsket tid.
- 2) Den oplyste prik (2) placeret i øverste venstre hjørne af urdisplayet angiver, at tiden er PM. For AM-tid vil denne prik ikke lyse.

Indstilling af alarmtid

Indstilling af alarm 1

- 1) Slide the "ALARM MODE SWITCH" (12) til AL1 position, alarmindikatoren "AL1" (1) vil lyse.
- 2) Tryk og hold knappen "ALARM SET" (5) nede, og tryk samtidig på "FAST"-knappen (9) eller "LANGSOM"-knappen (10) for at flytte urvisningen frem, indtil du når den ønskede alarmindstilling.
- 3) Sørg for, at alarmtiden er korrekt indstillet til AM eller PM (1).

Indstilling af alarm 2

- 1) Når alarm AL1 er blevet indstillet, skubbes "ALARM MODE SWITCH" (12) til AL2 position. , vil alarmindikatoren "AL2" (17) lyse.
- 2) Tryk og hold knappen "ALARM SET" (5) nede, og tryk samtidig på "FAST"-knappen (9) eller "LANGSOM"-knappen (10) for at flytte urvisningen frem, indtil du når den ønskede alarmindstilling.

Valg af 12 eller 24 timers format

– uret er indstillet til 12 timer for Storbritannien og uret er indstillet til 24 timer for Europa

Tryk og hold hurtigknappen (9) i 6 sekunder for at gå ind i timevalgtilstanden, slip hurtigknappen (9), når displayet viser "12 H" eller "24 H". Tryk og slip timeknappen for at skifte mellem 12 eller 24 timer.

Hvis der ikke foretages et valg inden for 4 sekunder, vil det sidst viste timeformat blive valgt, og displayet vender tilbage til den normale tidstilstand.

Alarm

Aktiver alarmer:

- 1) For at aktivere Alarm 1 skal du skubbe til "ALARM MODE SWITCH" (12) to AL1 position. alarmindikatoren "AL1" (1) vil lyse.
- 2) For at aktivere Alarm 2, skal du skubbe til "ALARM MODE SWITCH" (12) to AL2 position, alarmindikatoren "AL2" (17) vil lyse.
- 3) For at aktivere begge alarmer skal du skubbe "ALARM SELECTOR" (1) til AL2-positionen, alarmindikatorerne "AL1" (1) og "AL2" (17) vil lyse.

For at vælge Wake up mode

For at vælge opvågningstilstand skal du skubbe "Alarmfunktionskontakten" (8) til den ønskede position:-

- a) "BUZZ" for lyd b) "VIB" til sengeryster c) "VIB/ BUZZ" til både lyd og sengeryster
- BEMÆRK: når først opvågningstilstanden er valgt, vil dette gælde for begge alarmer.

Alarmmønstre

Når alarmerne er aktiveret, vil alarmmønstret for buzzeren/det blinkende display være ude af sync med vibratoren. Det betyder, at når buzzer/blinkende display er ON, vil vibratoren være OFF, og mens summer/blinkende display er OFF, vil vibratoren være ON.

ALARM 1 - Når Alarm 1 er aktiveret, vil den have 3 bip for buzzer, derefter vibratoren. Dette mønster gentages, indtil alarmerne stoppes.

ALARM 2 - Når Alarm 2 er aktiveret, vil den have 4 bip for buzzer, derefter vibratoren. Dette mønster gentages, indtil alarmerne stoppes.

Justering af alarmens varighedstid

Standardindstillingen for alarmvarighed er 30 minutter; du kan justere alarmvarigheden mellem 1 minut og 59 minutter efter ønske. Sådan justeres alarmens varighed:

- Tryk og hold AL. SET-knap (5) i seks sekunder. Urdisplayet vil vise standardalarmvarigheden som '30'. Slip AL-indstillingsknappen

- Tryk på knappen "MIN" (10) for at justere alarmvarigheden til den ønskede indstilling, fra 1 minut til 59 minutter.
- Når displayet viser den ønskede alarmtid, vender det tilbage til normal urtilstand efter 3 sekunder. Den nye indstilling af alarmvarighedstid bliver den nye standard og forbliver i hukommelsen, indtil du ændrer den igen.

Snooze operation

1. Når alarmen tændes om morgenen, kan du trykke på SNOOZE-knappen (8) for at stoppe alarmen midlertidigt. Alarmen slukker i 9 minutter eller i den forudbestemte tid, du vælger fra 1-30 minutter, og tænder derefter igen. Slumrefunktionen kan gentages i det uendelige, indtil alarmen slukkes.
2. SNOOZE-funktionen for Alarm 1 og Alarm 2 er uafhængig af hinanden.

Justering af snooze-tiden

Standardindstillingen for snoozetid er 9 minutter, men du kan justere snoozetiden mellem 1 minut og 30 minutter efter ønske. Sådan justeres snooze-tiden:

- Tryk og hold SNOOZE-knappen (8) nede i fire sekunder. Urdisplayet vil vise standard snooze-tid '9'. Slip snooze-knappen
- Tryk på knappen "SLOW" (7) for at justere snoozetiden til den ønskede indstilling, fra 1 minut til 30 minutter.
- Når displayet viser den ønskede snooze-tid, vender det tilbage til normal urtilstand efter 3 sekunder. Den nye snooze-tidsindstilling bliver den nye standard og forbliver i hukommelsen, indtil du ændrer den igen.

Sluk alarmen

Alarmen kan slukkes midlertidigt for dagen eller permanent slukkes.

- 1) Når alarmen går, skal du trykke på knappen "ALARM OFF" (7) for at slukke den for dagen og tænde igen på samme tid næste dag, hvis alarmindstillingerne ikke er ændret.
- 2) For at slukke for alarmen permanent skal du skubbe "Alarmsfunktionskontakten" (8) ned til OFF-positionen. Alarmen aktiveres ikke, før "Alarmsfunktionskontakten" (8) er indstillet til "VIB/BUZZ", "VIB" eller "BUZZ".

BEMÆRK: Alarm Off-funktionen for Alarm 1 og Alarm 2 er uafhængig af hinanden.

Lysdæmper drift

Der er en 5-trins lysstyrkekontrol til LED-displayet. Tryk én gang på SNOOZE-knappen for at ændre displayets lysstyrke. Lysstyrken vil skifte fra 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (fra lyst til svagt og derefter fra svagt til lyst).

***BEMÆRK*: Lysdæmperfunktionen fungerer ikke, når uret er i snooze-tilstand.**

Lydstyrkekontrol

- 1) For at justere lydstyrken, drej VOLUME-hjulet (4) i nederste højre hjørne af uret.

Tonekontrol

- 1) For at justere TONE skal du dreje TONE-hjulet (14) i øverste højre hjørne af uret.

Sengeryster/vibrator

- 1) Fastgør bed shaker-stikket på bagsiden af uret ved "VIBRATOR INPUT" (15).
- 2) For at tænde for vibratoren skubbes "Alarm Function Switch" (8) til "VIB/BUZZ" eller "VIB" position.
- 3) Placer vibrator mellem madras og boxspring.

Batteri backup

For brug af batteribackup, kan du installere et 9-volt alkalisk batteri bag på uret, der er placeret under batterirummets dæksel (11). Batteriet skal købes separat. **Bemærk, at LED-displayet ikke vises under strømsvigt, men uret vil stadig køre og holde den korrekte tid, indtil strømmen kommer tilbage.**

Under et strømsvigt kan det alkaliske batteri kun holde urets IC kørende i op til 30 dage. **(Under et strømsvigt vil LED-displayet ikke vise tiden.)**

BEMÆRK: For de bedste resultater anbefales det, at batteriet udskiftes hver 6. måned. Hvis uret ikke bruges i et stykke tid, anbefales det at fjerne batteriet for at undgå skader på uret som følge af batterilækage.


DC 9V strømindgang

Sæt "DC POWER INPUT" (13) på bagsiden af DC9V IN ved siden af "VIBRATOR INPUT" (15); det er den mindre input af de to.

BEMÆRK: VIGTIGT: Forveksle ikke "DC POWER INPUT" (13) med "VIBRATOR INPUT" (15)

GENERELLE DATA

UL-listet strømadapter: AC100-240V~, 50/60Hz

Strømforgbrug: Adapter output: DC9V , 0.65A/5.85W

 <p>Lysende flash og pilespids inden for trekant er et advarselsskilt, der advarer dig om farlig spænding inde i produktet.</p>	<p>ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN AF ELEKTRISK CHOK, UNDGÅ AT FJERNE DEKSEL (ELLER TILBAGE) FRA PRODUKT. INGEN DELE, SOM BRUGER SERVICES INDE. HENVIS SERVICE TIL DIN SONIC ALERT FORHANDLER.</p>	 <p>Udråbstegn inden for trekanten er en advarselsskilt, der advarer dig vigtige instruktioner ledsager produktet.</p>
--	--	---

ADVARSEL: FOR AT FOREBYGGE BRAND ELLER STØD MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Normal funktion kan blive forstyrret af kraftig elektromagnetisk interferens. Hvis dette er tilfældet, kan normal funktion genoptages ved blot at nulstille enheden ved at følge proceduren i brugsanvisningen. Hvis funktionen ikke genoptages, kan du prøve at flytte enheden til et andet sted.

- Opmærksomheden skal henledes på de miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.



-  dette indikerer separat indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr.

SONIC ALERTS 2 ÅRS BEGRÆNSEDE GARANTI

Sonic Boom Alarm Clock Model SBB500ss er garanteret mod fabriksfejl i materialer og udførelse i (1) år fra købsdatoen. Inden for denne periode vil Sonic Alert efter vores valg reparere eller udskifte SBB500ss uden beregning af reservedele og arbejde. Du skal blot sende SBB500ss (efterbetalt) og en kopi af din salgseddelse som købsbevis til:

Geemarc Telecom

2 rue Galilée, Parc de l'étoile, 59760 Grande-Synthe, France

GENBRUGSDIREKTIVER

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er blevet på plads for produkterne ved slutningen af deres levetid genbruges på bedste vis.

Når dette produkt er ude af drift, skal du ikke lægge det i din husholdningsaffaldsspand.

Brug venligst en af følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Fjern batterierne og læg dem i en passende WEEE-beholder. Kast produktet i en passende WEEE-tank.
- Eller aflever det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber en ny, skal de Acceptere det. Så hvis du respekterer disse instruktioner, sikrer du menneskers sundhed og miljøbeskyttelse.

CE-erklæring: Sonic Alert erklærer hermed at dette produkt er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU og lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU (hvis relevant).

Overensstemmelseserklæringen kan konsulteres på www.geemarc.com